

Aron+

11723 Het Aron+ ziekenhuisbed is een in de hoogte regelbaar multifunctioneel zuilenbed. Het bed bevat zowel op functioneel en esthetisch vlak als op onderhoudsvlak optimale eigenschappen.

Onderwagen

- Frame uit 2 geanodiseerde aluminium lengteliggers met 2 stalen dwarsliggers.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot $\pm 16^\circ$.
- Integral S wielen \varnothing 150 mm op precisiekogellagers met centraal remmechanisme.
- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$.
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie.
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun.
- Batterij.
- Geperforeerde, uitneembare kunststof ligvlakplaten voor eenvoudige reiniging.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- Equipotentiaalverbinding.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- De bedpanelen bestaan uit een metalen frame (Vela, Jaro*) of een kunststof frame (* Lauro-paneel) met een volkunststof inzetpaneel.
- Geanodiseerde aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van kunststof accessoirehaken.

Elektrische bedmanipulaties

- Activatie van de elektrische functies d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox*, een *verpleegbox* (*) of een *satelliet bediening* (*).
- Handbediening met voorgeprogrammeerde slaapfunctie.
- Een *mini-verpleegbox* of *verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.

Paneeltypes

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (enkel bij Trix) (*)
- Senzo (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (enkel met Jaro) (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, Lengte: 211 cm
- Hoogtevariatie ligvlak: ± 41 cm - ± 81 cm (var. 2%)
- Veilig gewicht: 230 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 200 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm

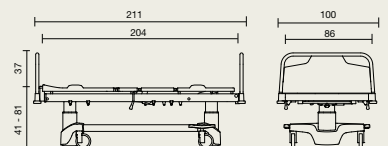

Materiaalgebruik en afwerking

- **Metaal:** epoxy-coating RAL 9006 alu, geanodiseerd aluminium, chroom (*).
- **Kunststof.**
- **Volkunststof.**
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen (dikte 6 mm).
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Vast hoofdpaneel.
- Onrusthekkens.
- Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox (ACC)).
- Verpleegbox (ACO) met handschakelaar en uitschuifbaar dekenrek.
- Verpleegbox (ACO) met satellietbediening (FPP) en uitschuifbaar dekenrek.
- Nachtlucht onder bed.
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- Elektro-mechanische snelverstelling (CPR).
- Rembuzzer.
- 5^{de} wiel.
- Muurafstandhouder.
- Tweelingwielen \varnothing 150 mm.
- DIN rail (voet, hoofd, hoofd- en voet).

