

Fero Houten relax

07579 De Fero relaxzetel is uitgerust met een speciaal voor de zorg ontwikkeld mechanisme. Het Classic mechanisme kan eenvoudig versteld worden door zich licht af te duwen en dit zonder het manipuleren van een hendel. De optionele "raising & sitting assist" biedt ergonomische ondersteuning bij het opstaan én neerzitten, dankzij de onder-steunende beweging van de zit.

Onderstel

- 4 gelamelleerde beuken poten verbonden met massief beuken steunen.
- 2 gelamelleerde beuken armsteunen.
- Verlijmde pen-en-gat verbinding.
- Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief houten dwarsregel en een stalen frame.
- Ergonomische knoparmliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 7,5 cm breedte.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Standaard voorzien van een eettafelbevestiging.
- 4 design tweelingwielen Ø 100 mm met individuele rem.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende dichtheid voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 46 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende dichtheitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel.

Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Classic mechanisme

- Eenvoudige verstelling in 3 posities, nl. zithouding, leeshouding en relaxpositie.
- Het mechanisme brengt eerst de benen naar omhoog, waarna het mogelijk wordt om de gehele zetel verder te inclineren.
- Eenvoudige verstelling door zich licht af te duwen, zonder manipulatie van een hendel.
- Optimaal zitcomfort in elke positie door constante hoek tussen rugsteun en zitting tijdens het kantelen.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij de telescopisch beensteun.
- De beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.



Afmetingen

- 07579** | Houten relaxzetel
- B 68 x D 76-143 x H 120 cm
 - Zithoogte: 46 cm
 - Zitdiepte: 52 cm
 - Zitbreedte: 53 cm
 - Hoogte armsteunen: 67 cm
 - Veilig werkgewicht: 135 kg

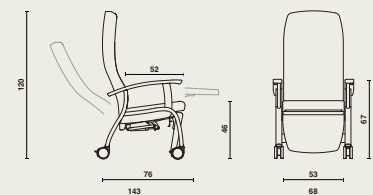

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, gelamelleerd), Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zitkussen met een toplaag in 40 mm viscoelastisch schuim en bi-elastische hoes (ook mogelijk op beensteun).
- Gesloten wangen.
- Accessoirehaakjes.
- DIN rail.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Verstelbaar en afneembaar hoofd-/nekkussen.
- Serumhuls Ø 19 of 32 mm.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Eettafelhouder op rug.
- Houten poten zonder wielen.
- Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten.
- Tweelingwielen Ø 100 mm met individuele rem met richtingswiel.
- Voetensteun (zithoogte = 51 cm).
- Eettafelhouder op rug.
- Raising and sitting assist.
- Beensteun met kunststof beschermhoes.

