

Fero Metalen relax

- 04749** De Fero relaxzetel met wielen is uitgerust met een speciaal voor de zorg ontwikkeld mechanisme. Het Ergo-line mechanisme kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero-gravity' positie.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie.
- 2 kunststof armleggers.
- Ergonomische knoparmleggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Geïntegreerde eettafelbevestiging.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 5 cm breedte.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 Integral S designwielen Ø 125 mm op precisiekogellagers waarvan 2 achterste wielen centraal geremd met richtingfixatie.
- Uitschuifbaar voetensteun met opstapbeveiliging, in kunststof met antislipstructuur.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende dichtheid voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstrooming.
- Comfortabele zithoogte van 52 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende dichtheitszones voor optimaal zitcomfort.
- Rugsteun met verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Metalen duwbeugel aan rugsteun.

Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Ergo-line mechanisme:

- Kantelt simultaan de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*).
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 97° in zitpositie tot 120° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme in werking treedt inclineert de zit tot 24°.
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- Het beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.


(* 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



Afmetingen

04749 | Metalen relaxzetel:

- B 74 x D 78-155 x H 125 cm
- Zithoogte: 52 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 70 cm

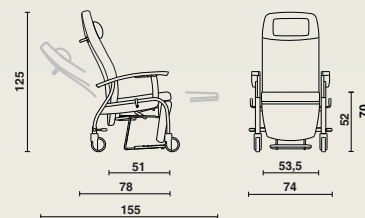

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Schuim: CMHR en CM-schuim (brandvertragend).
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Vergrendeling van de bedieningshendel.
- Manueel bijstelbaar beensteun.
- Zitkussens met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Serumphuls.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Dubbele aluminium design rempedaal.
- Anti-spitsvoetenbankje.

