

Fero Metalen rustzetel

05563 De Fero kantelbare rustzetel is een uiterst comfortabele zetel met specifieke eigenschappen voor de zorgsector.
De kantelbare rug biedt u een hoog comfort bij langdurig zitten.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie.
- Comfortabele licht gebogen kunststof armsteunen van ± 5 cm breedte.
- Ergonomische knoparmliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Geïntegreerde eettafelbevestiging.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Poten vooraan voorzien van kunststof vloerbeschermers.
- Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten vergemakkelijken het verplaatsen van de zetel.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende dichtheid voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstrooming.
- Comfortabele zithoogte van 45,5 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun


- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Rugsteun is traploos verstelbaar tot 24° d.m.v. een gasveer.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie d.m.v. gemakkelijk bereikbare hendel aan beide zijden.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende dichtheitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.



Afmetingen

05563 | Metalen rustzetel:

- B 72 x D 67-108 x H 115 cm
- Zithoogte: 45,5 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 70 cm

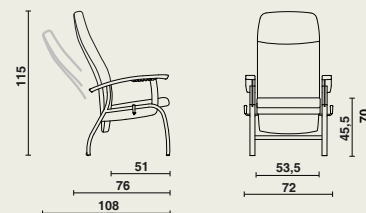

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Schuim: CMHR en CM-schuim (brandvertragend).
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Serumhuls.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.

