

Fero Metalen rustzetel

06038 De Fero kantelbare rustzetel met neerschuihbare armen en wielen, is een uiterst comfortabele zetel met specifieke eigenschappen voor de zorgsector.
De kantelbare rug biedt u een hoog comfort bij langdurig zitten.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 Integral S designwielen Ø 125 mm op precisiekogellagers, waarvan 2 achterste wielen centraal geremd met richtingfixatie.
- Uitschuifbaar voetensteun met opstapbeveiliging, in kunststof met antislipstructuur.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 51 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Rugsteun is traploos verstelbaar tot 24° d.m.v. een gasveer.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie d.m.v. gemakkelijk bereikbare hendel aan beide zijden.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Kunststof duwbeugel aan rugsteun.

Neerschuihbare armen


- Ergonomische knoparmliggers, in kunststof, vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Standaard voorzien van eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve verchroomde stalen assen.
- In neerwaartse richting vergrendeld d.m.v. een veerhendel.
- In laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.



Afmetingen

06038 | Metalen rustzetel:

- B 73 x D 74-108 x H 125 cm
- Zithoogte: 51 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 73,5-53 cm

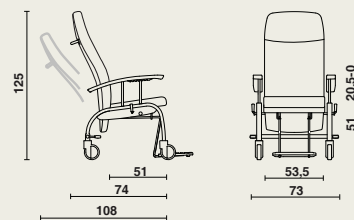

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs), verchroomd.
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Serumhuls.
- Dubbel design rempedaal.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.

