

Fero Metalen relax

07471 De Fero relaxzetel met neerschuihbare armen, is uitgerust met een speciaal voor de zorg ontwikkeld mechanisme. Het Ergo-line mechanisme kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero-gravity' positie.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Poten vooraan voorzien van kunststof vloerbeschermers.
- Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten vergemakkelijken het verplaatsen van de zetel.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 45,5 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Rugsteun met verstelbaar en afneembaar hoofd/nekussen.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.

Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm, bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Ergo-line mechanisme:

- Kantelt simultaan de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*).
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 97° in zitpositie tot 120° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme in werking treedt inclineert de zit tot 24°.
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- Het beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Neerschuihbare armen

- Ergonomische knoparmliggers, in kunststof, vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Standaard voorzien van eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve verchroomde stalen assen.
- In neerwaartse richting vergrendeld d.m.v. een veerhendel.
- In laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.


(* 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



Afmetingen

07471 | Metalen relaxzetel:

- B 70,5 x D 67-155 x H 115,5 cm
- Zithoogte: 45,5 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 66-45,5 cm

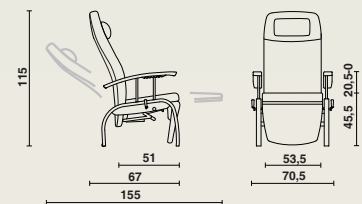

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs), verchroomd.
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Schuim: CMHR en CM-schuim (brandvertragend).
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Vergrendeling van de bedieningshendel.
- Manueel bijstelbaar beensteun.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Zwenkbare verbrede armsteunen.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Seruimhuls.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.

