

Fero Fauteuil en bois

05562 Le fauteuil de repos inclinable Fero est un fauteuil extrêmement confortable, spécialement adapté au secteur des soins de santé. La capacité d'inclinaison du dossier vous offre un grand confort pour une assise prolongée.

Châssis

- 4 pieds en hêtre lamellé reliés par un cadre en hêtre massif.
- 2 accoudoirs en hêtre lamellé.
- Assemblage par tenons et mortaises collés.
- Côtés solidement reliés par une traverse en bois massif et une structure métallique.
- Accoudoirs ergonomiques facilitant l'assise et le lever.
- Accoudoirs arrondis et confortables d'une largeur de $\pm 7,5$ cm.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- Pieds pourvus de patins en matière synthétique.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélaminé MDF, 12 mm d'épaisseur.
- Recouvert de mousse anti-feu de 2 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Une hauteur d'assise confortable de 45,5 cm.
- Finition en similicuir orné de piqure décorative.

Dossier


- Le dossier est fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, 12 mm d'épaisseur.
- Dossier inclinable progressivement jusqu'à 24° au moyen d'un vérin pneumatique.
- Verrouillage possible dans chaque position à l'aide d'une manette facilement accessible des deux côtés.
- Recouvert de mousse anti-feu de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqure décorative.



Dimensions

05562 | Fauteuil de repos en bois :

- L 68 x P 65-108 x H 115 cm
- Hauteur d'assise: 45,5 cm
- Profondeur d'assise: 51 cm
- Largeur d'assise: 53,5 cm
- Hauteur des accoudoirs: 64 cm
- Charge de fonctionnement en sécurité: 135 kg

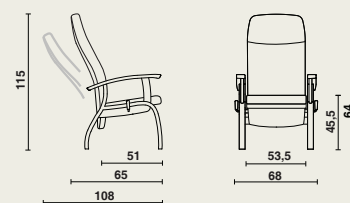

Matériel utilisé et finition

- Bois: hêtre (massive, lamellé), plaque multiplex, MDF.
- Métal: revêtement époxy (gris clair), chromé.
- Mousse ignifugée.
- Tissu d'ameublement: selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Fixation d'une tablette.
- Appui-tête/nuque réglable.
- Accoudoirs avec revêtements amovibles.
- Accoudoirs semi-revêtus.
- Côtés fermés et revêtus.
- Crochets pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Douille pour porte-sérum.
- Porte-sérum.
- Réducteur anatomique.
- Coussin d'assise viscoélastique.
- Roulettes intégrées aux pieds arrière.
- Support pour tablette repas sur le dossier.

Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

Accessoires

Veillez vous référer à notre liste
d'accessoires.

