

Fero Fauteuil métallique

06038 Le fauteuil de repos inclinable Fero, roulant avec accoudoirs abaissables, est un fauteuil extrêmement confortable, avec des propriétés spécifiques au secteur des soins de santé. Le dossier inclinable offre un très grand confort pour une assise prolongée.

Châssis

- Solide construction en métal, soudée.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- 4 roues design Integral S de Ø 125 mm sur roulement à billes de précision, dont les 2 roues arrière équipées d'un frein central avec fixation de direction.
- Repose-pieds coulissant avec protection de marche-pied, en matière synthétique avec structure anti-dérapante.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélaminé MDF, de 12 mm d'épaisseur.
- Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Une hauteur d'assise confortable de 51 cm.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Dossier

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, de 12 mm d'épaisseur.
- Dossier progressivement inclinable jusqu'à 24° au moyen d'un vérin pneumatique.
- Verrouillage possible dans chaque position au moyen d'une manette facilement accessible des deux côtés.
- Recouvert de mousse anti-feu, de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.
- Poignée de pousse en matière synthétique sur le dossier.

Accoudoirs abaissables


- Accoudoirs ergonomiques en matière synthétique, facilitant l'assise et le lever.
- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.
- Réglage de la hauteur en 4 positions, par 2 axes en acier massif, chromés.
- Verrouillage en position basse au moyen d'une manette à ressort.
- La plus basse position est à la même hauteur que l'assise.



Dimensions

06038 | Fauteuil de repos métallique:

- L 73 x P 74-108 x H 125 cm
- Hauteur d'assise: 51 cm
- Profondeur d'assise: 51 cm
- Largeur d'assise: 53,5 cm
- Hauteur des accoudoirs: 73,5-53 cm

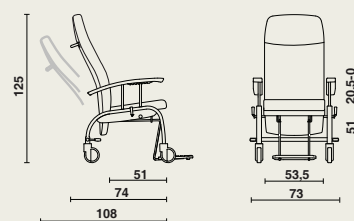

Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy (gris clair), chromé.
- Bois: plaque multiplex, MDF.
- Matière synthétique.
- Mousse ignifugée.
- Tissu d'ameublement: selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Appui-tête/nuque réglable et amovible.
- Crochets pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Porte-sérum.
- Double pédale de frein design.

Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

Accessoires

Veillez vous référer à notre liste
d'accessoires.

