

# Atlas Care

**06261** La table de nuit Atlas Care avec réfrigérateur, est une table de nuit qui correspond parfaitement à la gamme d'armoires Atlas.

## Version avec réfrigérateur (réfrigérateur, espace ouvert, tiroir)

- 2 panneaux de côtés avec une latte frontale, dos, fond et un plateau supérieur.
- Fabriquée en panneaux d'aggloméré mélaminé, de 18 mm d'épaisseur.
- Assemblage des panneaux par des excentriques ou chevilles en bois.
- Placard de rangement avec réfrigérateur.
- Réfrigérateur silencieux à absorption «Dometic Minicool - Silencio DS 400 BI».
- Contenance de 37 litres.
- Porte avec finition HPL.
- Eclairage intérieur avec LED.
- Câble en spirale.
- Tiroir amovible fait de parois métalliques entre lesquelles fond et dos en bois sont fixés.
- Le tiroir est monté dans le corps de l'armoire au moyen de rails en acier de qualité supérieure avec arrêt.
- Poignée métallique design.
- Les parties métalliques sont protégées par un revêtement époxy.
- Le plateau à angles et bords arrondis, est en aggloméré mélaminé de 18 mm.
- 4 roues jumelées design Ø 65 mm.


## Tablette Livia optionnelle

- Rabattable.
- Facilement inclinable dans les deux sens.
- Pourvue d'un bord relevé.
- La partie rabattable est montée sur un solide rail en aluminium, fini par une couche d'anodisation.
- La tablette est réglable en hauteur (entre 80 et 110 cm) au moyen d'un vérin pneumatique.
- Dimensions de la tablette : 63 x 40,5 cm.
- Le vérin pneumatique est activé par une pédale.
- La tablette est en ABS anti-feu.
- Le tout est monté sur 5 roues design de Ø 65 mm (5<sup>ème</sup> roue avec la tablette).
- Optionnellement la tablette est disponible avec le mécanisme Click 'n' turn. Grâce à ce mécanisme, la tablette peut être montée du côté gauche ou du côté droite de la table de nuit ou échangée entre plusieurs tables de nuit du même type.



## Dimensions

**06261** | 49,5 x 49,5 x hauteur 88 cm  
avec tablette Livia | 65 x 49,5 x hauteur 88 cm

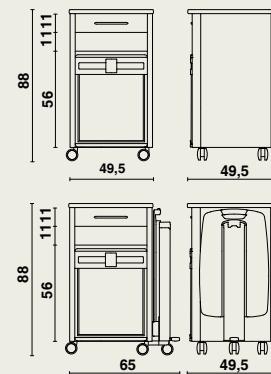

## Matériel utilisé et finition

- Bois : en aggloméré (mélaminé).
- Métal : revêtement époxy (gris clair).
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur la **construction** et **entretien** : voir nos fiches matériaux.

## Options

- Version avec placage en hêtre.
- Tablette Livia.
- Galerie.
- Serrure à cylindre.
- Douilles pour porte-téléphone.
- Porte-téléphone.
- Tablette escamotable.
- 4 roues design Ø 65 mm.
- 4 roues design Ø 65 mm avec des freins.
- Mécanisme Click 'n' turn.
- Chargeur USB et 2 prises intégrés à l'arrière.

## Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.  
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

## Poignées

- Poignée ouverte
- Poignée fermée

