

Quadra Care

13808 De Quadra Care nachttafel met koelkast is een compacte nachttafel met een hedendaagse strakke vormgeving.

Uitvoering met koelkast (koelkast + deur, open legruimte, lade)

- 2 zijpanelen met een rug, bodem en een opliggend bovenblad.
- Vervaardigd uit gemelamineerde spaanplaat, 19 mm dikte.
- De zijpanelen en tussenpaneel worden met de bodem gemonteerd d.m.v. houten deuvels en koud verlijmd tot een stevige kastromp.
- Het bovenblad wordt met de romp verbonden d.m.v. excenters.
- Opbergkast met koelkast.
- Geruisloze absorptiekoelkast van "Dometic Minicool - Silencio DS 400 BI".
- Inhoud van 34 liter.
- Deur met HPL afwerking.
- Ingewerkt handvat.
- Positie van de handgreep wordt geaccentueerd d.m.v. groen accent.
- Binnenverlichting met LED en deursensor.
- Spiraalsnoer.
- De nachttafel is voorzien van een deur in gemelamineerde spaanplaat.
- De deur, voorzien van een metalen design handgreep, is bevestigd aan de kastromp door 2 hoogwaardige zelfsluitende scharnieren.
- De deur van de koelkast en van de nachttafel openen en sluiten zich gelijktijdig dankzij een sleepscharnier.
- Uitneembare lade bestaat uit metalen wanden waartussen een houten bodem en rug bevestigd zijn.
- De lade wordt d.m.v. hoogwaardige stalen geleiders met eindaanslag gemonteerd in de kastromp.
- Metalen design handgreep.
- Metalen onderdelen worden beschermd door een epoxy-coating.
- Bovenblad uit dubbelzijdig gemelamineerde spaanplaat van 19 mm.
- Randen in PVC.
- 4 design tweelingwielen Ø 65 mm.


Optionele eettafel Livia

- Uitklapbaar.
- Eenvoudig inclineerbaar in beide richtingen.
- Voorzien van opstaande rand.
- Het opklapbaar gedeelte is gemonteerd op een stevig aluminium geleidingsprofiel, afgewerkt met een anodisatielaag.
- De eettafel is in hoogte verstelbaar (tussen 80 en 110 cm) d.m.v. een gasveer.
- Afmetingen eettafel: 63 x 40,5 cm.
- De gasveer wordt geactiveerd door een voetpedaal.
- De eettafel bestaat uit brandvertragende ABS.
- Geheel gemonteerd op 5 designwielen Ø 65 mm (5° designwiel bij eettafel).
- Optioneel kan de eettafel voorzien worden van een Click 'n' turn systeem. Dankzij dit eenvoudige kliksysteem wordt de eettafel afneembaar en omkeerbaar.



Afmetingen

13808 | 52,5 x 50,5 x hoogte 88 cm

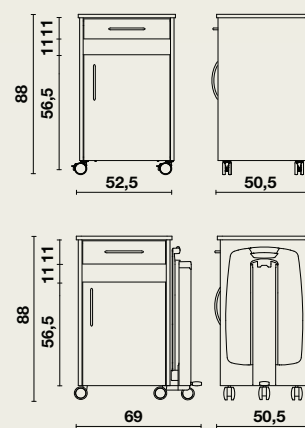

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: spaanplaat (gemelamineerd).
- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Uitvoering in finer.
- Eettafel Livia.
- Bovenblad in gestratificeerde spaanplaat.
- Telefoonhouder.
- Uitschuifblad.
- 4 designwielen Ø 65 mm met rem.
- Click 'n' turn systeem.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Handgrepen

- Open handgreep
- Gesloten handgreep

