

# Chaise percée métal

**00969** Cette solide chaise percée est, grâce à sa double assise, discrète et facile à intégrer dans la chambre du résident.

## Châssis

- La structure est construite en tubes d'acier gainés, de Ø 25 mm avec une plaque en acier inoxydable qui dissimule le sceau.
- 2 accoudoirs en polyuréthane sont fixés sur le dessus des bras métalliques afin d'augmenter le confort du patient.
- La structure métallique est finie par un revêtement en époxy RAL 9006
- Les pieds en avant sont pourvus de patins en matière synthétique, les pieds à l'arrière sont pourvus de roues 65 mm sans frein.


## Assise et dossier

- La double assise se compose d'une partie supérieure amovible ou rabattable et d'une lunette rabattable en son dessous.
- L'assise recouverte peut être rabattue au moyen de 2 charnières inoxydables.
- La lunette stratifié massif à ouverture ovale, est vissée à la structure avec des charnières en acier inoxydable.
- Sous la lunette rabattable se trouve un sceau amovible en matière synthétique avec couvercle qui repose sur 4 éléments d'accrochage en matière synthétique.
- L'assise est recouverte de mousse anti-feu de 20 mm d'épaisseur et d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup>.
- Le dossier recouvert de tissu est fait en multiplex ergonomiquement préformé de 12 mm d'épaisseur, solidement vissé à l'aide de plaques de fixation métalliques.
- Le dossier est pourvu de mousse anti-feu de 10 mm d'épaisseur et d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup>.
- Les parties en bois sont protégées par une couche de vernis.



## Dimensions

**00969** | 45 x 54 x h 81 cm

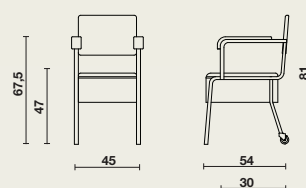

## Matériel utilisé et finition

- Bois: hêtre (massive, lamellé), multiplex, MDF.
- Stratifié massif.
- Métal: revêtement en époxy (gris clair).
- Mousse ignifugée.
- Tissu d'ameublement: selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur la **construction** et l'**entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

## Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.  
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

