

Talo kantelbare rustzetel

De Talo zetel is een comfortabele en fraai vormgegeven kantelbare rustzetel op wielen. De kantelbare rug biedt u een hoog comfort bij langdurig zitten.

Onderstel

- Het onderstel is samengesteld uit 2 zijkanten in massieve beuk verbonden door een massief beuken dwarsligger.
- De onderdelen van de zijden zijn verbonden met een verlijmd pen-en-gatverbinding.
- Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief beuken dwarsregel en een stalen frame.
- Ergonomische armliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 7 cm breedte.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 design tweelingwielen $\varnothing 100$ mm met individuele rem.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan hindert de bloeddorstrooming niet.
- Comfortabele zithoogte van 47 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Rugsteun is traploos verstelbaar tot 24° d.m.v. een gasveer.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- Brede ergonomische kunststof duwbeugel op rug.


Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Afmetingen

Kantelbare rustzetel met wielen | B 71,5 x D 94 x H 124 cm

- Zithoogte: 47,5 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 65,5 cm

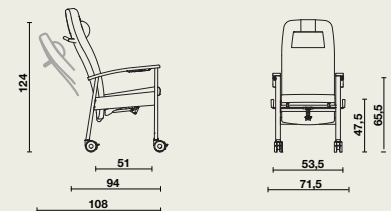

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief), Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Eettafelbevestiging op armsteunen.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Gesloten zijkanten.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Serumhuls.
- Eettafelhouder op rug.

