

Vico

Stretcher

by Haelvoet



Vico

wenn schnell handeln wichtig ist



001	Seitengitter (*) • Sicherheit hat keinen Preis
	Die Atmosphäre Seitengitter schützen den Patienten über 2/3 der gesamten Stretcherlänge.
002	Matratze • Komfortables Liegen
	Zwei Matratzentypen sind für den Vico Stretcher entworfen worden. Die Standardmatratze ist aus 7 cm CMRH Schaum hergestellt. Die Comfort Matratze (*) ist 10 cm dick. Drei cm dieser Matratze besteht aus viskoelastischem Schaum.
003	Schiebebügel • Praktisch herunterklappbar
	Diese bequeme Handgriffe helfen Ihnen während des Manövrierens des Stretchers. Die Schiebepögel können einfach heruntergeklappt werden. Auf diese Weise kann der Patient problemlos die notwendige Pflege bekommen. Schiebepögel am Kopfende gehören zur Standardausstattung. Schiebepögel (*) am Fußende sind optional erhältlich.
004	Liegefläche • Röntgenfähig
	Eine 2-geteilte Liegefläche aus Vollkunststoff gehört zur Standardausstattung des Vico Stretchers. Diese Liegefläche ist für Röntgen-Thorax-Untersuchungen geeignet. Eine 4-geteilte Liegefläche (*) ist optional erhältlich.
005	Haltegriffe • Optimale Pflege
	Die zwei Haltegriffe am Kopf- und Fußende ermöglichen, dass der Stretcher optimal ausgestattet werden kann.
006	Bedienungshebel • In Reichweite
	Dank einer Gasfederunterstützung kann die Rückenlehne einfach bis zu 90° verstellt werden.
007	Höhenverstellung • Äußerst stabil
	Die Trägerarme garantieren, dass alle Höhen äußerst stabil sind. Die große Verstellmöglichkeit von 46 cm bis zu 85,5 cm (mit Laufrollen ø 125 mm und ohne Zubehör) vereinfacht die Pflege.
008	Abdeckung (*) • Hygienisch
	Die herausnehmbare, abgerundete Abdeckung vereinfacht die Reinigung des Untergestells.
009	Pedal zur Höhenverstellung • Einfach zu betätigen
	Ein Pedal betätigt den hydraulischen Antrieb der Höhenverstellung.
010	5. Rolle (*) • Hohe Manövrierfähigkeit
	Ein Trumpf in kleinen Zimmern und schmalen Gängen.
011	Laufrollen • Große Manövrierfähigkeit
	Ein reichhaltiges Angebot an hochwertigen Design Laufrollen garantiert einen äußerst mobilen und manövrierfähigen Stretcher.
012	Zentralbremse • Betätigung in einer Bewegung
	Zentral gebremste Laufrollen, mit einem gut erreichbaren Pedal, erleichtern dem Pflegepersonal die Verwendung des Vico Stretchers.
013	(Anti-) Trendelenburg-Verstellung (*) • Äußerst ergonomisch
	Wenn Sie das Pedal betätigen, neigt die Liegefläche sich fließend bis zur gewünschten (Anti-)Trendelenburg-Position.
014	Wandabweisrollen • Schutz wenn nötig
	Der Vico Stretcher ist serienmäßig mit 4 Wandabweisrollen ausgestattet, die sowohl die Wand als auch den Stretcher während des Verschiebens schützen.

Haelvoet nv
Edition 03/2021
Haelvoet behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
Leichte Farbabweichungen sind möglich.


* Option für Vico Stretcher

Effiziente Verwendung

Der multifunktionelle Vico Stretcher ermöglicht eine schnelle und effiziente Erste-Hilfe-Leistung. Der Stretcher kann mit zahlreiches Zubehör ausgestattet werden, das sowohl die Arbeit fürs Pflegepersonal erleichtert als auch das Wohlbefinden des Patienten erhöht.


• Bedienungen

Dank der einfach betätigbaren Bedienungen kann die gewünschte Position im Handumdrehen bekommen werden.

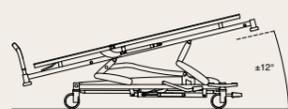


(Anti-) Trendelenburg-Verstellung

Das rote Pedal am Fußende des Stretchers betätigt die (Anti-) Trendelenburg-Verstellung (*). Wenn Sie auf das Pedal treten, neigt die Liegefläche sich fließend bis zur gewünschten Position.

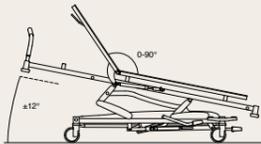

Sitzposition

Die 2-geteilte Liegefläche ist mit einem einfach erreichbaren Hebel an der Rückenlehne ausgestattet. Auf diese Weise kann problemlos eine komfortable Position für den Patienten bekommen werden. Eine 4-geteilte Liegefläche ist optional erhältlich (*).

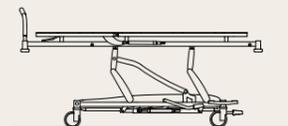

Höhenverstellung

Dank der einfach erreichbaren Pedale geht keine Zeit verloren, wenn die Höhenverstellung betätigt werden muss. Dank dieser beidseitig erreichbaren hydraulischen Pedale kann die Höhe der Liegefläche ergonomisch eingestellt werden.

• Röntgenfähige Liegefläche


Die röntgenfähige Liegefläche des Vico Stretchers ist sehr geeignet, um Röntgenaufnahmen zu machen. Zusammen mit dem Röntgenkassettenhalter (*) ist es möglich, äußerst schnell eine Diagnose zu stellen. Bei Bedarf kann dieser Röntgenkassettenhalter an der Rückenlehne befestigt werden, oder vollständig unter die Liegefläche geschoben werden. Der Patient braucht also nicht verlegt zu werden, wodurch keine unnötigen Risiken genommen werden müssen.



* Option für Vico Stretcher

Funktionelles Design

Während des Entwurfs des Vico Stretchers wurde einer effizienten Pflege große Aufmerksamkeit geschenkt. Dank einer gut durchdachten Verwendung von Materialien, und der glatten und gut erreichbaren Oberflächen ist dieser Stretcher schnell gebrauchsfertig.

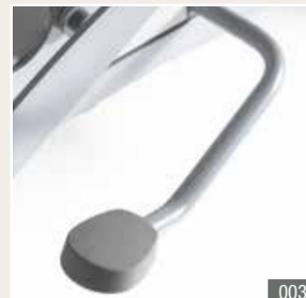

• Matratze Maximaler Patientenkomfort

Zwei Matratzentypen sind für den Vico Stretcher entwickelt worden. Die beiden Typen sind aus feuerhemmendem Schaum hergestellt. Sie sind äußerst dauerhaft und einfach zu reinigen. Die Vico Standardmatratze ist 7 cm dick. Die Comfort Matratze (*) hat eine viskoelastische Oberfläche von 3 cm und bietet dem Patienten zusätzliche Unterstützung.

• Mechanisch Minimale Wartung

Das wartungsfreie hydraulische Antriebselement und die Gasfeder garantieren, dass dieser Stretcher eine dauerhafte Investierung ist.

• Herausnehmbare Abdeckung

Dank der abgerundeten Abdeckung (*) aus Kunststoff sind schwierige erreichbare Oberflächen einfach zu reinigen. So bekommt Schmutz keine Chance.



001 Das (Anti-) Trendelenburg-Pedal (*) sorgt für eine äußerst ergonomische Verstellung.

002 Der Bedienungshebel der Rückenlehne ist einfach zu betätigen.

003 Das Pedal zur Höhenverstellung ist beidseitig erreichbar und kann einfach vom Pflegepersonal betätigt werden.

004 Der Röntgenkassettenhalter (*) kann einfach und schnell auf die Rückenlehne oder den Rahmen aufmontiert werden.

005 Die Auflagen aus Vollkunststoff (*) sind für Röntgenuntersuchungen geeignet, ohne den Patient verlegen zu müssen.

006 Die Standardmatratze ist 7 cm dick.

007 Die herausnehmbare Abdeckung (*) garantiert eine leichte Reinigung des Vico Stretchers.




Mobil und sicher


Um einen Patienten schnell und problemlos transportieren zu können, sind gute Bewegungs- und Manövriermöglichkeiten notwendige Bedingungen. Die großen Laufrollen und die herunterklappbaren Schiebebügel des Vico Stretchers tragen dazu bei.

- **Zentralbremse**

In einer Bewegung kann man die Bremse betätigen, die Laufrollen in eine neutrale Position stellen oder die Richtungsfeststellrolle aktivieren. Der Vico Stretcher kann wahlweise auch mit 4 Bremspedalen ausgestattet werden (2 zusätzliche Pedale am Kopfende).

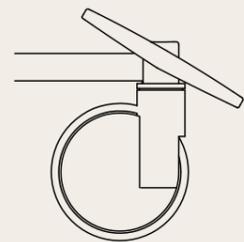


4 gebremste Laufrollen

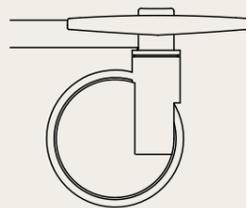

4 ungebremste Laufrollen

Diese Position ermöglicht es, den Stretcher in alle Richtungen zu verstellen.

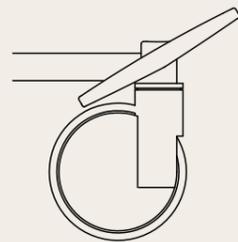

1 fixierte Richtungsfeststellrolle

Diese Rolle macht es einfacher, den Stretcher geradeaus zu verschieben.



- **5. Rolle**

Der Vico Stretcher kann auch mit einer **zentralen 5. Rolle** (*) ausgestattet werden. Hierdurch wird die Manövrierfähigkeit des Stretchers erhöht, besonders in kleinen und schmalen Räumen. Die gefederte Eigenschaft der Rolle dämpft außerdem kleine Unebenheiten im Fußbodenbelag und vermeidet schlagartige Aufprälle bei Schwellen.



- **Seitengitter**

Die **Atmosphère Seitengitter** (*) bieten zusätzlichen Patientenschutz während des Transports. Die Seitengitter können einfach aus- und heruntergeklappt werden.


- **Herunterklappbarer Infusionsständer**

Der **herunterklappbare Infusionsständer** (*) kann am Kopf- und/oder Fußende des Vico Stretchers befestigt werden. Dieser ist teleskopisch verlängerbar, wird mit einem Spannsystem verriegelt, und ist mit 2 Haken ausgestattet. Der herunterklappbare Infusionsständer (*) ist in einer zweiteiligen oder dreiteiligen Version erhältlich.



- **Schiebebügel oder Kopf-/Fußteilfüllungen**

Die Schiebebügel garantieren, dass der Stretcher ergonomisch gesteuert und manövriert werden kann. Die Schiebebügel am Kopfende gehören zur Standardausstattung. Wahlweise sind sie auch am Fußende erhältlich. Wenn diese nicht notwendig sind, können sie einfach heruntergeklappt werden, so dass der Patient ungehindert gepflegt werden kann.

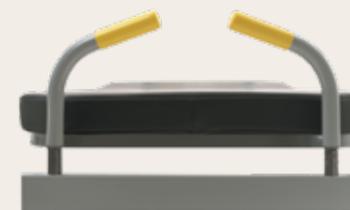

Typ 1: Diese **herunterklappbare Schiebebügel** am Kopfende gehören zur Standardausstattung. Wahlweise sind 2 Schiebebügel am Fußende auch möglich.



Typ 2: Die optionale **Kopf-/Fußteilfüllung Vela** besteht aus einem Metallbügel mit einer Einsatzfüllung aus Vollkunststoff. Vela ist serienmäßig mit einer Verriegelung ausgestattet. Ein verchromter Bügel ist wahlweise auch erhältlich.



* Option für Vico Stretcher

Feste Höhe

Der Vico Stretcher ist auch mit fester Höhe erhältlich. Dieser Stretcher ist für internen Transport äußerst geeignet. Die röntgenfähige Liegefläche ermöglicht eine schnelle erste Diagnose.

Der Vico Stretcher mit fester Höhe kann mit herunterklappbaren Infusionsständern, Seitengittern, einem zusätzlichen Paar Schiebebügel am Fußende, DIN-Normschienen, usw. ausgestattet werden. Mit Ausnahme von dem höhenverstellbaren Untergestell, kann hierdurch fast dieselbe Funktionalität des höhenverstellbaren Stretchers bekommen werden.

Zubehör

Das Zubehör ist optimal auf die anwesenden Aufnahmehülsen und Halterungen abgestimmt. Unser Zubehör muss denselben hohen Anforderungen unserer Stretcher entsprechen.


005	Monitorhalter		<p>Der Monitorhalter besteht aus einem Stahlrahmen und einem Tablett aus Vollkunststoff.</p> <p>Maße des Tablett: 650 x 300 mm</p>
006	Neigungsanzeige		<p>Die Neigungsanzeige zeigt den Neigungswinkel des gewählten Teils der Liegefläche. Die Anzeige kann per Paar am Rahmen der Rückenlehne oder der Liegefläche befestigt werden.</p>
007	Sauerstoffflaschenhalter zum Einstecken		<p>Der Sauerstoffflaschenhalter besteht aus einem starken Arm mit einem Korb aus massivem Stahldraht. Alle Teile sind epoxybeschichtet oder verchromt (*). Der Sauerstoffflaschenhalter kann in den 4 Ecken des Stretchers befestigt werden.</p>
008	Fester Sauerstoffflaschenhalter		<p>Der feste Sauerstoffflaschenhalter wird am Untergestell befestigt, und ist epoxybeschichtet oder verchromt (*).</p>
009	Comfort Matratze		<p>Die Comfort Matratze (*) ist 10 cm dick. Drei cm dieser Matratze besteht aus viskoelastischem Schaum.</p>

001	DIN-Normschiene		<p>Eine zusätzliche verchromte DIN-Normschiene kann an beiden Seiten des Stretchers befestigt werden.</p>
002	Herunterklappbarer Infusionsständer		<p>Ein teleskopischer herunterklappbarer Infusionsständer mit 2 Haken kann am Kopf- und/oder Fußende befestigt werden. Er kann mittels eines Spannsystems verriegelt werden. Wahl aus einem zwei- oder dreiteiligen Infusionsständer.</p>
003	Lockerer Infusionsständer		<p>Der lockere herausnehmbare Infusionsständer mit 2 Haken kann in den 4 Ecken des Stretchers befestigt werden.</p>
004	Röntgenkassettenhalter		<p>Der Röntgenkassettenhalter kann an der Rückenlehne befestigt werden, oder vollständig unter die Liegefläche geschoben werden.</p>

* Option für Vico Stretcher


Vico Stretcher Zusammenfassung

Maße und Leistungen (höhenverstellbarer Stretcher)

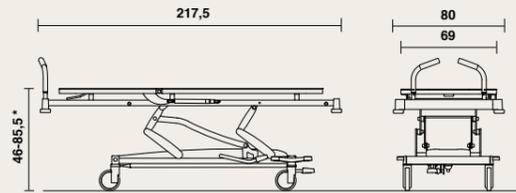

- Breite: 80 cm, Länge: 217,5 cm
- Höhenverstellung der Liegefläche: ± 46 cm - ± 85,5 cm (* mit Laufrollen Ø 150 mm)
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 85 kg
- Matratze: 201 x 70,5 cm, Dicke: 7 cm

Maße und Leistungen (Stretcher mit fester Höhe)

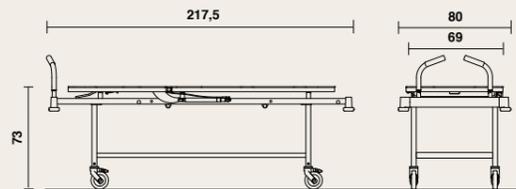

- Breite: 80 cm, Länge: 217,5 cm
- Feste Höhe der Liegefläche: 73 cm (mit Laufrollen Ø 125 mm)
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 70 kg
- Matratze: 201 x 70,5 cm, Dicke: 7 cm




Ein ausgezeichnetes Preis-Qualitätsverhältnis geht bei Haelvoet nicht auf Kosten der Umwelt, denn Haelvoet hält Dauerhaftigkeit – in beiden Bedeutungen des Wortes – sehr hoch. Alle Haelvoet Produkte haben eine lange Lebensdauer. Außerdem gewährt Haelvoet 10 Jahre Garantie auf Konstruktionsfehler. Der Vico Stretcher wird gemäß der Norm ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 hergestellt.

Der Vico Stretcher entspricht der europäischen Verordnung MDR 2017/745 über Medizinprodukte und allen anderen geltenden europäischen Normen:

EN ISO 14971 Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte.

	Standard Vico Stretcher		Optionen Vico Stretcher			
LIEGEFLÄCHE						
	• 2-geteilte Liegefläche aus Vollkunststoff		• 4-geteilte Liegefläche aus Vollkunststoff			
LAUFROLLEN						
	• Levina Laufrollen Ø 125 mm, individuelle Bremse (nur mit fester Höhe)	• Integral S Laufrollen Ø 150 mm, Zentralbremse (nur mit höhenverstellbarem Stretcher)	• Integral S Laufrollen Ø 200 mm, Zentralbremse (nur mit höhenverstellbarem Stretcher)	• 5. Rolle, nur mit Integral S Laufrollen Ø 200 mm	• Zusätzliches Set Bremspedale am Kopfende	
KOPF-/FUßTEILFÜLLUNG						
	• Schiebebügel am Kopfende		• Schiebebügel am Fußende	• Vela Kopf-/Fußteillfüllung		
SEITENGITTER						
			• Atmosphäre Seitengitter			
BEDIENUNG						
	• Bedienungsbügel	• Pedal zur Höhenverstellung	• (Anti-) Trendelenburg-Pedal			
ZUSÄTZLICHES						
	• 4 Wandabweisrollen		• DIN-Normschiene	• Abdeckung	• Herunterklappbarer Infusionsständer	• Papierrollenhalter

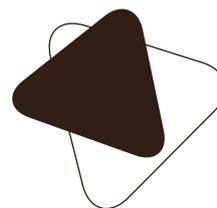

Haelvoet nv | **Belgien**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95
F +32 (0) 51 48 73 19
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Die Nederlande**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **Frankreich**
130, Bd. de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Die Schweiz**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Rumänien**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro