

Domus Classic Soft

07597 Genieten van optimaal zitcomfort in alle rust en gezelligheid is de kerngedachte van de Domus relaxzetel. Het Classic mechanisme kan eenvoudig versteld worden door zich licht af te duwen en dit zonder het manipuleren van een hendel. De optionele “raising & sitting assist” biedt ergonomische ondersteuning bij het opstaan én neerzitten, dankzij de ondersteunende beweging van de zit.

Onderstel

- De afgeronde zijwanden bestaan uit 2 OSB platen van 30 mm en worden d.m.v. een stalen constructie stevig aan elkaar verbonden.
- Volledig beklede zijwanden met brandvertragend schuim en gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- Comfortabele brede armsteunen van ± 10 cm.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Massief beuken poten, voorzien van kunststof vloerbeschermers.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 44 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Beensteun: multiplex plaat, dikte 10 mm, bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Classic mechanisme


- Eenvoudige verstelling in 3 posities: zit-, lees- en relaxpositie.
- Het mechanisme brengt eerst de benen naar omhoog, waarna het mogelijk wordt om de gehele zetel verder te inclineren.
- Eenvoudige verstelling door zich licht af te duwen, zonder manipulatie van een hendel.
- Optimaal zitcomfort in elke positie door constante hoek tussen rugsteun en zitting tijdens het kantelen.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij de telescopisch beensteun.
- De beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.



Afmetingen

07597 | Domus Classic Soft:

- B 75 x D 82 x H 120 cm
- Zithoogte: 44 cm
- Zitdiepte: 52 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 68 cm
- Veilig werkgewicht: 135 kg

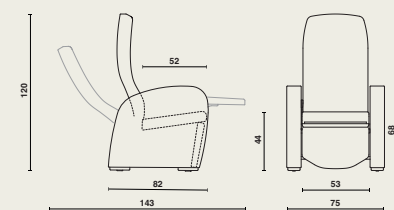

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Massieve beuk, Multiplex, OSB, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zitkussen met een toplaag in 40 mm viscoelastisch schuim en bi-elastische hoes (ook mogelijk op beensteun).
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Fixatiebeugel.
- Eettafelhouder op rug.
- Serumhuls en/of serumhouder Ø 19 mm.
- Verborgen tweelingwielen, vooraan Ø 32mm, achteraan Ø 50 mm met remfunctie d.m.v. rembeugel.
- Designwielen ø 100 mm met rem.
- Designwielen ø 100 mm met rem en richtingsvastzetter.
- Voetensteun (enkel met wielen ø 100 mm).
- Ergonomische kunststof duwbeugel (enkel met wielen ø 100 mm).
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Raising & sitting assist.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

