

Avento

hoog / laag met
individuele rem

15610 De Avento relaxzetel is in hoogte verstelbaar en uitgerust met individueel geremde wielen. Het Ergo-line mechanisme kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot een 'zero-gravity' positie.

Onderstel met hoog/laag mechanisme

- Stevige gelaste stalen constructie.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 Levina wielen Ø 100 mm, individueel geremd.
- Stabiel hoog/laag mechanisme d.m.v. parallelle draagarmen.
- De hoog/laag verstelling van 49 tot 79 cm (zithoogte) gebeurt door een hydraulische pomp geactiveerd door gemakkelijk bereikbare voetpedalen aan beide zijden van de zetel.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- De bloeddorstrooming wordt niet gehinderd dankzij de afgeronde zitting.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim in 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel aan rugsteun.
- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm, bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Ergo-line mechanisme:

- Kantelt simultaan de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*).
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 97° in zitpositie tot 120° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme in werking treedt inclineert de zit tot 24°.
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- De beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.


Neerschuihbare armen

- Ergonomische knoparmliggers, in kunststof, vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Standaard voorzien van eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve verchroomde stalen assen.
- In neerwaartse richting vergrendeld door een veerhendel.
- In laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.

Afmetingen

Metalen hoog/laag relaxzetel:

- B 73 x D 81-157 x H 121-151 cm
- Zithoogte: 49-79 cm
- Zitdiepte: 50 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 73,5-53 cm
- Veilig werkgewicht: 150 kg

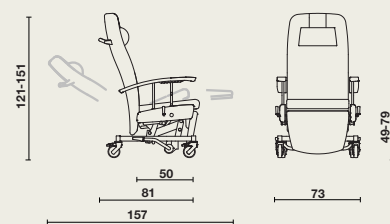

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Zwenkbare verbrede armsteunen.
- Accessoirebeugel.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Sta-op functie met vergrendeling.
- Elice eettafel.
- Eettafelhouder op rug.
- Serumhuls + serumhouder.
- Houders voor afneembaar hoofddeel.
- Vergrendeling Ergo-line mechanisme.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.

(* 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomechisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.

