

Domus Fauteuil Flex

09887 Le fauteuil Domus avec dossier haut et assise ergonomique convient très bien pour une position assise prolongée et confortable. En plus, ce fauteuil est équipé d'un coussin d'assise amovible, ce qui facilite l'entretien.

Châssis

- Les côtés arrondis sont faits de 2 plaques OSB de 18 mm et reliés par une structure métallique.
- Côtés recouverts de mousse anti-feu et de similicuir orné de piqûre décorative.
- Les accoudoirs arrondis et confortables d'une largeur de ± 5 cm.
- Fixation tablette repas.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- Pas de points de fixation visibles.
- Roulettes design Ø 65 mm avec frein.
- L'ensemble peut être en option monté sur des pieds en hêtre massif avec petites roulettes à l'arrière.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, 12 mm d'épaisseur.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Une hauteur d'assise confortable de 45 cm.
- Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Dossier


- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, 12 mm d'épaisseur.
- Recouvert de mousse anti-feu de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.
- Dossier avec appui-tête/nuque réglable et amovible.



Dimensions

09887 | Domus Fauteuil Flex :

- L 62 x P 81 x H 115 cm
- Hauteur d'assise: 45 cm
- Profondeur d'assise: 50 cm
- Largeur d'assise: 52 cm
- Hauteur des accoudoirs: 63 cm

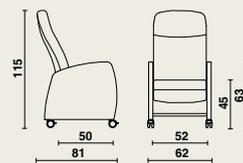

Matériel utilisé et finition

- Bois: hêtre massif, plaque multiplex, OSB, MDF.
- Métal: revêtement époxy (gris clair).
- Mousse ignifugée.
- Tissu d'ameublement: selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Accoudoirs en bois / en matière synthétique.
- Selle d'abduction en combinaison avec la tablette repas.
- Coussin d'assise avec mousse viscoélastique et housse bi-élastique.
- Réducteur anatomique.
- Accoudoirs avec revêtements amovible.
- Des pieds en bois avec petites roulettes à l'arrière.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

