

Avento e-move

16655 Der elektrisch höhenverstellbare Avento Ruhesessel ist mit einem zentralen Bremsmechanismus ausgestattet. Der E-move Mechanismus kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine 'Zero Gravity' Position mittels einer intuitiven Handbedienung.

Gestell mit Höhenverstellung

- Solide, geschweißte Metallkonstruktion, serienmäßig ausgestattet mit 2 Aufnahmehülsen für Infusionshalter (Ø 19 mm) und mit einem Halter für die abnehmbare Kopfstütze.
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- 4 Integral S Design Laufrollen Ø 125 mm. Die Designbremsen sind mit einem zentralen Bremsmechanismus ausgestattet. Die Bremsen befinden sich zentral und an beiden Seiten des Sessels. Das Bremspedal kann an der Vorderseite des Sessels betätigt werden.
- Stabile Höhenverstellung mittels Paralleltragarme.
- Der Sessel ist mit einer intuitiven Handbedienung ausgestattet, die eine Höhenverstellung zwischen 53 und 83 cm (Sitzhöhe) ermöglicht.
- Ausziehbare Fußstütze mit Kippschutz aus Kunststoff und Antirutsch-Struktur.
- Die Design Schutzkappe ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Gestells.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Dank des abgerundeten Sitzes wird der Blutkreislauf nicht gehindert.
- Völlig gepolsterter Sitz mit Doppelnah.

Rückenlehne und Beinstütze

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Sperrholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Völlig gepolsterte Rückenlehne mit Doppelnah.
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne.
- Beinstütze in Sperrholz, Dicke 10 mm, gepolstert mit feuerhemmendem Schaum und mit Bezug.

Höhenverstellbare Armlehnen

- Ergonomische Armlehnen aus Kunststoff erleichtern das Hinsetzen oder Aufstehen.
- Esstablettbefestigungen gehören zur Standardausstattung.
- Höhenverstellung in 4 Positionen mittels 2 massiver verchromter Stahlachsen.
- Verriegelung nach unten, mittels eines Federhebels.
- In niedrigster Position auf gleicher Höhe mit der Sitzfläche.

E-move Mechanismus:

- Zwei Antriebs Elemente kippen die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine 'Zero-Gravity' Position.
- Die Rückenlehne und Beinstütze können auch individuell verstellt werden.
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 97° (Sitzposition) und 120° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 24 Grad, wenn der Relaxmechanismus aktiviert wird.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.
- Der Avento e-move lässt sich mittels einer intuitiven Handbedienung einfach betätigen.

Farben

Unser reichhaltiges Angebot an Farben steht Ihnen zur Verfügung.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(*) 'Zero Gravity' Position möglich: Diese Sitz-/Liegeposition ist auf Daten der NASA gegründet. In dieser neutralen Körperposition befinden alle Muskelkräfte sich in einem biomedizinischen Gleichgewicht. Quelle: "From outer space to you", Omni, März 1994.



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE


Weil Haelvoet ständig technologische Fortschritte anstrebt, behält Haelvoet sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.



Maße

16655 | Metallruhesessel mit Höhenverstellung

- 71 x 81-157 x H 125-155 cm
- Sitzhöhe: 49-74 cm
- Sitztiefe: 50 cm
- Sitzbreite: 53,5 cm
- Höhe der Armlehnen: 73,5-53 cm
- Sichere Arbeitslast: 150 kg

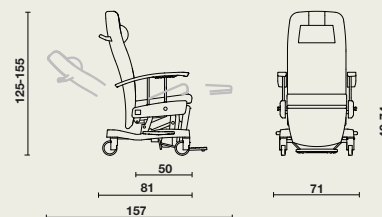

Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau).
- Kunststoff.
- Holz: Sperrholz, MDF-Platte.
- Schaum: CMHR und CM Schaum (feuerhemmend).
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel

Weitere Informationen über die **Materialien** und

Konstruktionen: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Zubehör und Optionen

- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Flexibler Halter für den Handschalter.
- Schwenkbare verbreitete Armlehnen.
- Zubehörhaken und / oder Befestigungsbügel.
- Ohrenbacken.
- Rückenlehne mit abnehmbarer Kopfstütze.
- Esstablett Elice.
- Infusionshalter (1- oder 2-teilig).
- Essbretthalter auf Rückenlehne.
- Urin-Flaschenhalter und / oder Sauerstoffflaschenhalter.
- Li-Ion Batterie.
- Rückenlehne mit höhenverstellbarem und abnehmbarem Kopfstütz-/Nackenkissen.
- Aufnahmehülse für Infusionshalter Ø 32 mm auf beiden Seiten
- Aufnahmehülse für Infusionshalter Ø 32 mm auf der rechten Seite (Ø 19 mm auf der linken Seite)