

Galleries de protection DuoSafe

Les galleries de protection DuoSafe offrent une protection antichute très flexible au patient. Via des claviers intégrés, le patient et le personnel soignant peuvent contrôler les fonctions du lit.



SOUTIEN À LA MOBILISATION

La forme ergonomique du panneau latéral fournit au patient le soutien nécessaire pour se lever ou marcher autour du lit. **Le bouton pour le réglage en hauteur**, stratégiquement placé, peut soulever le sommier pendant que le patient se tient aux panneaux latéraux. Il n'y a pas d'espace entre le lit et les galleries DuoSafe pour réduire le risque d'écrasement.



DESIGN APAISANT

Le confort et le repos améliorent l'état mental du patient et peuvent accélérer le processus de guérison. Grâce aux ouvertures dans les galleries DuoSafe, le patient peut regarder sur le côté lorsqu'il est couché dans son lit. Ce **contact visuel avec l'environnement** est ressenti comme apaisant.



PRIME

Panneau de lit avec poignées intégrées


Les poignées verticales offrent une meilleure prise en main lors du déplacement ou de la manipulation du lit. Les mains du personnel soignant sont protégées lors de la conduite du lit.

Claviers DuoSafe

CLAVIER - NURSING

Toutes les fonctions à portée de main


Le clavier pour personnel soignant à l'extérieur des panneaux DuoSafe est équipé de toutes les fonctions pour amener le patient dans la position souhaitée (assise, couchée ou relax). Les fonctions supplémentaires permettent au personnel soignant de verrouiller sélectivement les fonctions et de vérifier la position du lit et l'état de la batterie en un clin d'œil.

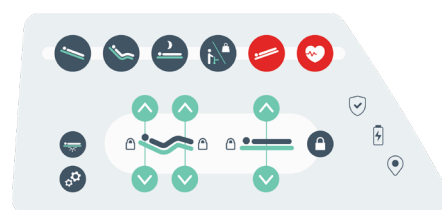

CLAVIER - PATIENT STANDARD

Intuitif et accessible


Le clavier patient avec rétroéclairage intégré permet de contrôler les fonctions du lit via un écran tactile facilement accessible. Le clavier peut être activé par le patient en se trouvant dans une position couchée, assise ou debout.

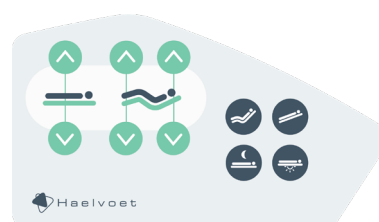

CLAVIER - PATIENT SMART

Autonomisation du patient

La version intelligente du clavier patient ajoute quelques fonctions supplémentaires telles que les installations de la chambre et la possibilité de se connecter avec un système d'appel infirmier.

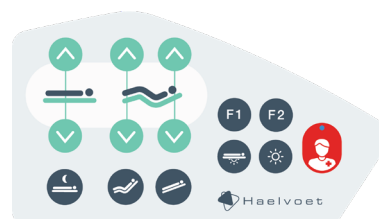

Le **rétroéclairage** augmente l'autonomie du résident pendant la nuit.
Les touches s'illuminent au toucher.

La sécurité avant tout


Les claviers intégrés dans les galeries DuoSafe sont équipés d'un indicateur qui indique en un clin d'œil si le lit est dans une position sûre.

POSITION DE LIT SÛRE

Lumière verte



- ✓ Le lit se trouve dans sa **position la plus basse**
- ✓ Les galeries de protection en **position la plus haute** (option)
- ✓ Le frein central est **activé** (option)

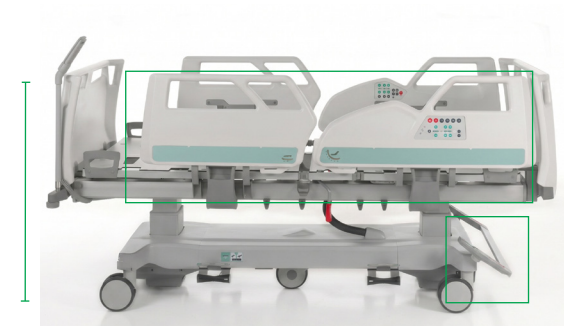


POSITION DE LIT NON SÛRE

Lumière rouge



- ✗ Le lit ne se trouve **pas dans sa position la plus basse**
- ✗ Les galeries de protection ne sont **pas dans leur position la plus haute** (option)
- ✗ Le frein central n'est **pas activé** (option)

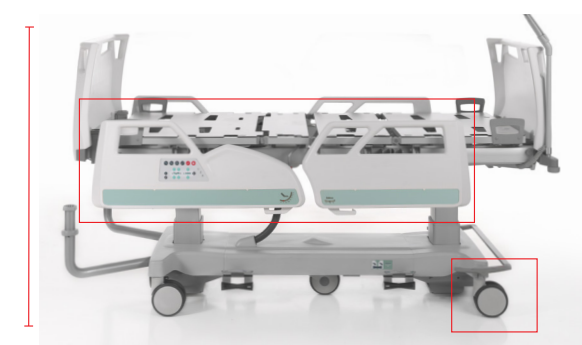

LEVIER CACHÉ

avec attention à l'ergonomie

La manipulation des galeries DuoSafe se fait facilement et rapidement **d'une seule main**. Le levier ergonomique est complètement intégré dans la conception des galeries, il n'y a donc **pas de parties saillantes**.

Les galeries DuoSafe sont équipées d'un amortisseur spécialement conçu. Le mouvement vers le bas est inhibé, ce qui augmente le confort du patient et empêche la perturbation du calme.




Une conception bien réfléchie

Les galeries de protection DuoSafe et les panneaux de lit Prime sont entièrement adaptés aux besoins des utilisateurs. Une conception bien réfléchie et une utilisation durable des matériaux sont de la plus haute importance.

FONCTIONNALITÉ SUPÉRIEURE

Deux **crochets multifonctionnels** des deux côtés du DuoSafe permettent d'installer et d'utiliser des accessoires rapidement et facilement. Deux **clinomètres** intégrés indiquent l'angle du dossier et du sommier.

Des **douilles optionnelles** pour la télécommande ou des accessoires peuvent être montées dans les butoirs.

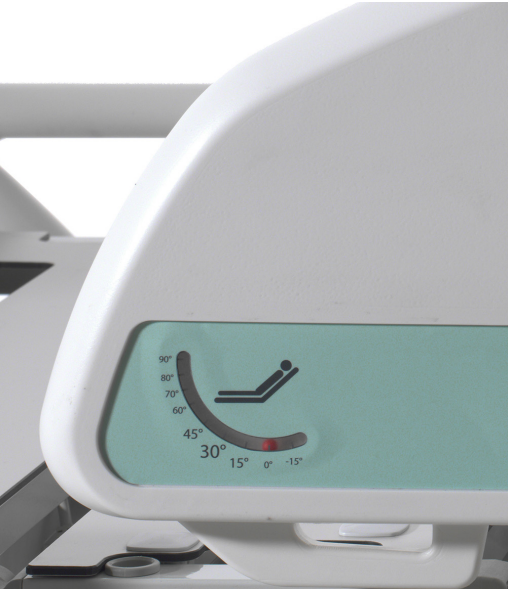

FACILE À NETTOYER

Les galeries de protection DuoSafe sont faciles à nettoyer en raison de leur conception bien réfléchie et de **leurs surfaces lisses en matière synthétique**. Les claviers sont encastrés dans l'ensemble et ne constituent pas d'obstacle lors du nettoyage.



VERROUILLAGE CENTRALISÉ

Le verrouillage central au milieu du panneau de lit Prime permet **de retirer et de remplacer le panneau facilement et rapidement**.



Les panneaux de lit

La structure de nos lits permet de choisir parmi plusieurs types de panneaux. Chaque panneau est caractérisé par ses lignes claires et son souci du détail.

		ATMOSPHERE	TRIX	TWIN	DUOSAFE
Type 1: Vela		○	×	×	×
Type 2: Jaro		○	○	○	×
Type 3: Prime		○	×	○	○

○ : Possible × : Pas possible



PANNEAU DE LIT AMOVIBLE

Tous les panneaux tête et pied sont amovibles sans outils. **Le panneau de lit Prime** en matière synthétique peut être placé sur le sol.

Les bandes décoratives sur les panneaux Prime et les galeries DuoSafe sont disponibles en deux couleurs.

