

Domus A-sync Flex

- 16821** Genieten van optimaal zitcomfort in alle rust en gezelligheid is de kerngedachte van de Domus relaxzetel.
- Het A-sync mechanisme laat toe rug- en beensteun afzonderlijk te verstellen.

Onderstel

- De afgeronde zijwanden bestaan uit OSB platen van 30 mm en worden d.m.v. een stalen constructie stevig aan elkaar verbonden.
- Volledig beklede zijwanden met brandvertragend schuim en gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- Comfortabele afgeronde armsteunen van ± 5 cm.
- Eettafelbevestiging.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Designwielen $\varnothing 65$ mm met rem.
- Optioneel mogelijk met massief beuken poten (licht conisch, ± 7 cm hoogte) voorzien van kunststof vloerbeschermers vooraan en achteraan met 2 geïntegreerde hulpwielen.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan zorgt voor een goede bloeddoodstroming.
- Comfortabele zithoogte van 45 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Voorzien van een verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.

A-sync mechanisme

- Laat toe om rug en beensteun afzonderlijk te verstellen.
- De rugsteun kan met behulp van een hendel aan de rechterzijde van de stoel geïnclineerd worden.
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht en zorgt voor een traploze verstelling van de rugsteun.
- De beensteun en zitting kan versteld worden door zich licht af te duwen.
- Optimale ondersteuning van de benen dankzij telescopisch beensteun.
- De beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Kleuren


Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.



Afmetingen

16821 | Domus A-sync Flex:

- B 62 x D 73 x H 115 cm
- Zithoogte: 44 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 52 cm
- Hoogte armsteunen: 64 cm
- Veilig gewicht: 135 kg

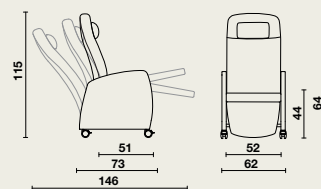

Materiaalgebruik en afwerking

- **Hout:** Massieve beuk, Multiplex, OSB, MDF.
- **Metaal:** epoxy-coating (lichtgrijs).
- **Brandvertragend schuim.**
- **Stoffering:** volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud:** zie onze materialenfiches.

Opties

- Houten / kunststof knoparmleggers.
- Abductieklos in combinatie met eettafel.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Fixatiebeugel
- Afneembare beklede armsteunen.
- Serumhuls en/of serumhouder.
- Houten poten met hulpwielen achteraan.
- Ophanghaak voor eettafel.
- Designwielen $\varnothing 100$ mm met rem.
- Designwielen $\varnothing 100$ mm met rem en richtingsvastzetter.
- Voetensteun (enkel met wielen $\varnothing 100$ mm).
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.

