

Avento

hoog / laag met
centraal remsysteem

20321 De Avento relaxzetel is in hoogte verstelbaar en uitgerust met een centraal remsysteem. Het Duo-line mechanisme voorziet een individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer. Bij verstelling van de rugsteun is er een simultane inclinatie van de zitting.

Onderstel met hoog/laag mechanisme

- Stevige gelaste stalen constructie, standaard voorzien van 2 serumhulzen (Ø 19 mm) en houders voor afneembaar hoofddeel.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 Integral S designwielen Ø 125 mm met 2 richtingswielen vooraan. De wielen worden centraal geremd d.m.v. design rempedalen. De rempedalen bevinden zich centraal en aan beide zijden van de zetel. Het rempedaal is bereikbaar vanaf de voorzijde van de zetel.
- Stabiel hoog/laag mechanisme d.m.v. parallele draagarmen.
- De hoog/laag verstelling van 53 tot 83 cm (zithoogte) gebeurt door een hydraulische pomp geactiveerd door gemakkelijk bereikbare voetpedalen aan beide zijden van de zetel.
- Uitschuifbaar voetensteun met opstapbeveiliging in kunststof met antislipstructuur.
- Design afdekkap bevordert een snelle en eenvoudige reiniging van het onderstel.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- De bloeddorstroming wordt niet gehinderd dankzij de afgeronde zitting.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim in 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel aan rugsteun.
- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm, bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Duo-line mechanisme:

- Individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.
- De gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van rugsteun en beensteun.
- Wanneer de rugsteun naar achter wordt geplaatst, inclineert de zitting mee van 7° tot 20°.
- Een hendel wordt gebruikt om rugsteun (rechter hendel) en beensteun (linker hendel) te activeren en te vergrendelen in elke positie.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij telescopisch beensteun.

Neerschuihbare armen

- Ergonomische knoparmliggers, in kunststof, vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Standaard voorzien van eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve verchromde stalen assen.
- In neerwaartse richting vergrendeld door een veerhendel.
- In laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.



Afmetingen

Metalen hoog/laag relaxzetel:

- B 73 x D 81-157 x H 125-155 cm
- Zithoogte: 49-79 cm
- Zitdiepte: 50 cm
- Zitbreedte: 53,5 cm
- Hoogte armsteunen: 73,5-50 cm
- Veilig werkgewicht: 150 kg

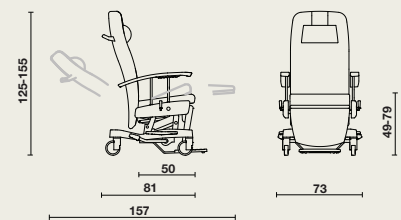

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Tweelingwielen Ø 125 mm.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Zwenkbare verbrede armsteunen.
- Accessoirehaken.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Elice eettafel.
- Serumhouder (1- of 2-delig).
- Eettafelhouder op rug.
- Urinefleshouder en/of zuurstoffleshouder.
- Raising & sitting assist
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Serumhuls Ø 32 mm aan beide zijden
- Serumhuls Ø 32 mm aan rechterzijde (Ø 19 mm aan linkerzijde)

