

# Avento

hauteur variable et système de freinage central

**20321** Le fauteuil relax Avento est réglable en hauteur et équipé d'un système de freinage central. Le mécanisme Duo-line incline le dossier et le repose-jambes indépendamment. Lorsque le dossier est ajusté, il y a une inclinaison simultanée du siège.

## Châssis avec réglage en hauteur

- Solide construction en métal, soudée. Le châssis est standard prévu de 2 douilles pour porte-sérum (Ø 19 mm) et de supports pour la tête amovible (option).
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- 4 roues design Integral S Ø 125 mm, freinage central à l'aide d'une double pédale de frein. Les pédales de frein sont situés au centre des deux côtés du fauteuil. Les pédales sont accessibles si l'on se trouve devant le fauteuil.
- Mécanisme de réglage en hauteur stable à bras parallèles.
- Le réglage en hauteur de 52 jusqu'à 80 cm (hauteur d'assise) se fait à l'aide d'une pompe hydraulique activée par deux pédales, facilement accessibles, des deux côtés du fauteuil.
- Repose-pieds coulissant avec protection de marche-pied, en matière synthétique avec structure anti-dérapante.
- Le couvercle en matière synthétique facilite le nettoyage du châssis.

## Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, épaisseur 12 mm.
- Recouverte de 2 couches de mousse ignifugée, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

## Dossier et repose-jambes

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, épaisseur 12 mm.
- Recouvert de mousse ignifugée, de 2 densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Dossier complètement revêtu en similicuir orné de piqûre décorative.
- Equipé d'une poignée de pousse ergonomique en matière synthétique.
- Repose-jambes fait d'une plaque en multiplex, épaisseur 10 mm, recouvert d'une mousse ignifugée et revêtu.

## Mécanisme Duo-line

- Permet d'incliner le dossier et le repose-jambes indépendamment.
- Un vérin pneumatique minimise la force d'activation nécessaire du mécanisme.
- Quand le mécanisme relax du dossier se met en action, l'assise incline de 7° jusqu'à 20°.
- Activation du mécanisme par 2 leviers. Verrouillage possible dans n'importe quelle position.
- Levier à gauche: activation du repose-jambe. Levier à droite: activation du dossier.
- Soutien optimal des jambes grâce au repose-jambes télescopique.

## Accoudoirs abaissables

- Accoudoirs ergonomiques en matière synthétique, facilitant l'assise et le lever.
- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.
- Réglage de la hauteur en 4 positions, par 2 axes en acier massif, chromés.
- Verrouillage vers le bas au moyen d'une manette à ressort.
- La plus basse position est à la même hauteur que l'assise.

### Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.  
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

### Accessoires


Veuillez vous référer à notre liste d'accessoires.



## Dimensions

Avento relax hauteur variable:

- L 73 x P 85-158 x H 127-155 cm
- Hauteur d'assise: 52-80 cm
- Profondeur d'assise: 52 cm
- Largeur d'assise: 53 cm
- Hauteur des accoudoirs: 71-52 cm
- Charge de fonctionnement en sécurité : 150 kg

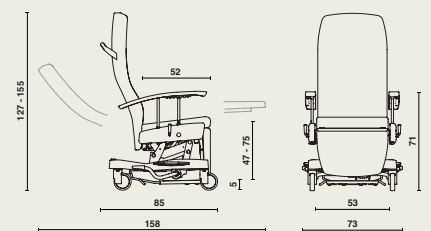

## Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy (gris clair).
- Bois: Multiplex, MDF.
- Matière synthétique.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit**: voir nos fiches matériaux.

## Options

- Roues jumelées Ø 125 mm.
- Coussin d'assise avec mousse viscoélastique et housse bi-élastique.
- Accoudoirs élargis, tournants.
- Crochets pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Dossier avec appui-tête amovible.
- Tablette repas Elice.
- Porte-sérum (en 1 ou 2 parties).
- Support pour tablette repas sur le dossier.
- Porte-bouteille (bouteille d'oxygène / d'urine).
- Raising & sitting assist
- Dossier avec appui-tête/nuque réglable et amovible.
- Douille pour porte-sérum Ø 32 mm des deux côtés
- Douille pour porte-sérum Ø 32 mm sur le côté droit (Ø 19 mm sur le côté gauche)

