

Siena Hospital

09556 Patul de spital Siena vă oferă o platformă pentru saltea extrem de funcțională și eficientă. Datorită opțiunilor flexibile de finisaj, patul poate fi combinat cu alte paturi de spital din gama noastră.

Cadrul inferior

- Picioare cu înălțime fixă sau ajustabile în 3 poziții (*).
- Patul poate fi echipat cu 4 roți de design Ø 100 mm cu frâne individuale (*).
- Cadrul poate fi echipat cu un mecanism central de frânare și 4 roți de design Ø 125 mm (numai la picioarele cu înălțime fixă) (*).

Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (*) secțiuni, ajustabilă manual.
- Posibilitate de a alege platformă saltea ajustabilă electric (*).
- Spătarul este ajustabil până la $\pm 70^\circ$ cu auto-regresie prin intermediul unui piston sau a unui actuator electric.
- Secțiunea genunchi este ajustabilă până la $\pm 34^\circ$ prin intermediul unui piston (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gambe/picioare este ajustabilă manual.
- Platformă saltea cu profile rotunjite de oțel.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu 2 suporturi sintetice pentru saltea.
- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Alegere între 4 tipuri de panouri diferite (3 cu panou inserat din laminat solid și 1 cu panou din lemn).
- Barele laterale de pe ambele părți sunt echipate cu 3 cârlige sintetice pentru accesorii.

Manipularea patului

- Ajustarea spătarului și a secțiunii genunchi se face pe baza unui piston prin intermediul unei manete dispuse pe ambele părți ale patului.
- Ajustarea electrică a spătarului și a secțiunii genunchi se face prin intermediul unei telecomenzi (*).
- Versiunea electrică poate fi echipată cu un panou de blocare care permite blocarea funcțiilor electrice printr-un singur buton (*).

Tipuri de panouri

- Vela (standard)
- Lauro (*)
- Jaro (* numai cu Trix)
- Senzo (*)

Protecții laterale

- Atmosphere (*)
- Trix (* numai cu Jaro)

Accesorii


Referință la lista de accesorii.

(*) Opțional



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 100 cm, Lungime: 208 cm
- Înălțime platformă saltea: ± 46 cm, ajustabilă până la ± 55 cm (în 3 poziții) (*)
- Sarcina de lucru sigură: 180 kg
- Greutate (fără opționale): 65 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm, grosime: 12 - 15 cm

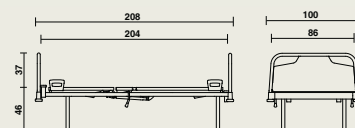

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 *aluminiiu alb*, cromat (*).
- Laminat solid.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale și construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

Opționale

- Platformă saltea cu 4 secțiuni din oțel.
- Platformă saltea cu 3 sau 4 secțiuni detașabile din laminat solid de 6 mm.
- Extensie platformă saltea până la +20 cm.
- Tipuri de panouri: Lauro, Jaro și Senzo.
- Distanțier de perete.
- Protecții laterale.
- Panou de blocare (ACL).
- Telecomandă (versiunea electrică).
- Funcția Trendelenburg.
- Cadru inferior Vico ajustabil pe înălțime.
- Capac sintetic detașabil, format în vid.
- Picioare ajustabile în 3 poziții.
- 4 roți de design Ø 100 mm cu frâne individuale.
- 4 roți de design Ø 125 mm cu frână centrală (numai la picioarele cu înălțime fixă).

