


# Pollux Protecții laterale

07110

## Construcție


- Protecțiile laterale Pollux constau din 2 profiluri de aluminiu.
- Barele laterale sunt învelite standard într-o structură de lemn.
- Protecțiile laterale pot fi integrate perfect în designul patului. Astfel, se păstrează aspectul natural al patului.
- Protecțiile laterale sunt integrate în panourile de la cap și picioare.
- Protecțiile laterale pot fi coborâte numai cu ajutorul ambelor mâini.
- Mecanismul de blocare împiedică coborârea neintenționată a protecțiilor laterale.
- Mecanismul de blocare este situat la ambele capete ale barei superioare.
- Barele profilate au un design ergonomic de prindere, astfel încât să poată fi manipulate cu ușurință.
- Distanța garantată între cele două bare asigură faptul că protecțiile laterale Pollux respectă cele mai stricte norme.
- În poziția cea mai joasă, protecțiile laterale nu prezintă un obstacol atunci când pacientul vrea să coboare din pat sau trebuie să fie transferat, nici la schimbarea lenjeriei de pat.
- Protecțiile Pollux se potrivesc perfect cu părțile laterale ale patului.
- Măsurată de la platforma saltea, înălțimea totală este de cca. 36,5 cm.

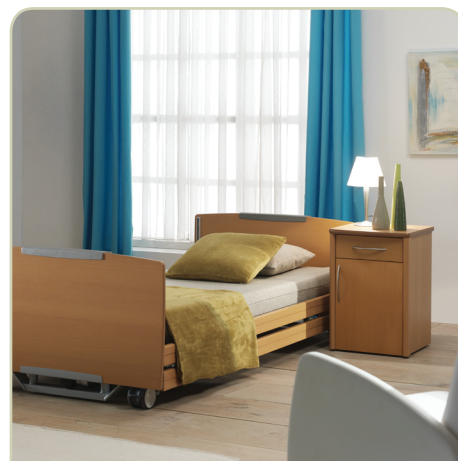

## Dimensiuni

07110 | Protecții laterale Pollux

- înălțime: 36,5 cm
- grosime saltea: max. 14 cm
- lungime: 204 cm

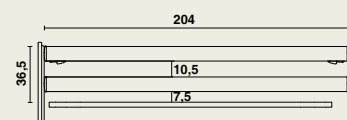

## Materiale și finisaje

- Metal: aluminiu.
- Material sintetic.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Protecțiile laterale Pollux sunt conforme cu norma **EN 60601-2-52**.

Pentru informații suplimentare despre **materiale și construcție**: consultați documentele disponibile.

## Opționale și accesorii

- Bare cu lungime extra (+10 sau +20), posibil în cazul extensiei permanente a patului.
- Husă de protecție pentru laterale.

## Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.  
Mostrele sunt disponibile la cerere.

(\*) Opțional

