

# Mauro Ergo-line

**20000** Scaunul Mauro este echipat cu un mecanism de relaxare special dezvoltat pentru sectorul de îngrijire. Mecanismul Ergo-line asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziție de "gravitație zero".

## Suport

- Construcție metalică sudată stabil.
- 4 roți de design Levina Ø 125 mm cu rulmenți de precizie; cele 2 roți din spate sunt echipate cu frână centrală și blocare direcțională.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Suport pentru picioare extensibil, sintetic, cu o structură antiderapantă.

## Șezut

- Șezut detașabil, realizat din placă MDF melaminat de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Înălțime confortabilă a șezutului de 46 cm (de la suportul pentru picioare).
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

## Spătar

- Realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Bară sintetică de împingere la spate (cu roți Ø 100 mm și Ø 125 mm).

## Suport gambe

- Realizat dintr-o placă de placaj de 10 mm, tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

## Mecanism Ergo-line

- Spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția *gravitație zero* (\*).
- Unghiul dintre șezut și spătar este cuprins între 97° (poziția de ședere) și 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Un piston reduce la minimum forța de activare necesară a mecanismului.
- Cu ajutorul unei manete din partea dreaptă, scaunul poate fi blocat în orice poziție.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.

## Cotiere

- Designul ergonomic al coterelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.

### Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.

### Accesorii

Referință la lista de accesorii.


(\*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



## Dimensiuni

### 20000 | Mauro Ergo-line cu cotiere fixe:

- L 72 x D 78-155 x H 128 cm
- Înălțime șezut de la suport picioare: 46 cm
- Înălțime șezut fără suport picioare: 50 cm
- Adâncime șezut: 51 cm
- Lățime șezut: 53 cm
- Înălțime cotiere: 70 cm
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

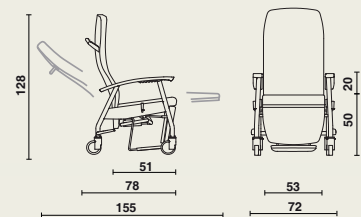

## Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică.
- Lemn: placaj, MDF.
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

## Opționale

- Mecanism de blocare pentru manetă.
- Suport gambe reglabil manual.
- Pernă de șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Cârlige pentru accesorii.
- Suport de fixare pentru centură de siguranță.
- Suporturi laterale la cap.
- Suport de fixare stativ de perfuzie.
- Tetieră detașabilă.
- Pedală dublă de frână.
- Roată spate antistatică (cu roți Ø 125 mm).
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Pernă pentru gât ajustabilă și detașabilă.
- Roți Linea Ø 65 mm cu frâne individuale, fără suport pentru picioare.
- Roți Levina Ø 100 mm cu frâne individuale.

