

Avento e-move

16655 Scaunul Avento este echipat cu un sistem electric de ajustare a înălțimii și un mecanism central de frânare. Mecanismul E-move asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția "gravitație zero" (*).

Suport cu mecanism de ajustare a înălțimii

- Construcție metalică sudată stabil, cu 2 suporturi de fixare stativ perfuzii și suporturi pentru tetiera detașabilă.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- 4 roți Integral S Ø 125 mm, cu sistem de frânare centrală activat prin pedale de frână de design. Pedalele de frână au o poziție centrală pe ambele părți ale scaunului, ușor accesibile și când vă aflați în fața scaunului.
- Mecanism stabil de ajustare a înălțimii prin intermediul unor brațe de susținere egale.
- Ajustarea înălțimii între 53 și 83 cm (înălțime șezut) se realizează cu ajutorul unei telecomenzi intuitive.
- Suport pentru picioare retractabil, din material sintetic, cu o structură antiderapantă.
- Datorită capacului sintetic de design, chiar și suprafețele greu accesibile pot fi curățate cu ușurință.

Șezut

- Șezut detașabil, realizat din placă MDF melaminată de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar și suport pentru gambe

- Realizat dintr-o carcasă de placaj de 12 mm preformată ergonomic.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Echipat cu pernă pentru gât ajustabilă și detașabilă.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Bară de împingere sintetică și ergonomică la spate.
- Realizat dintr-o placă de placaj de 10 mm, tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

Mecanism E-move

- 2 motoare înclină spătarul, șezutul și suportul pentru gambe în poziția *gravitație zero* (*).
- Spătarul și suportul pentru gambe sunt reglabile individual.
- Unghiul dintre șezut și spătar variază de la 97° (poziția de ședere) la 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.
- Activarea se face cu ajutorul unei telecomenzi (ajustarea înălțimii și mecanism de relaxare).

Cotiere ajustabile sus/jos

- Designul ergonomic al coterelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide pentru reglarea coterelor în 4 poziții diferite de înălțime.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, coterile se află la același nivel cu șezutul.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.


(* Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



Dimensiuni

16655 | Avento E-move reglabil pe înălțime:

- L 71 x D 81-157 x H 125-155 cm
- Înălțime șezut: 53-83 cm
- Adâncime șezut: 50 cm
- Lățime șezut: 53,5 cm
- Înălțime cotiere: 73,5-53 cm
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

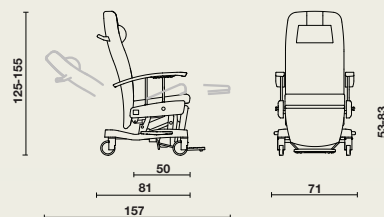

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Lemn: placaj, MDF.
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă de șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Suport flexibil pentru telecomandă.
- Cotiere late pivotante.
- Bară pentru accesorii.
- Bară de fixare pentru centura de siguranță.
- Suporturi laterale la cap.
- Spătar cu tetieră detașabilă.
- Tava de servit masa Elice.
- Stativ de perfuzie (1 sau 2 secțiuni).
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Suport recipient urină și / sau cilindru oxigen.
- Baterie Li-Ion.

