

Avento e-move

16655 Scaunul Avento este echipat cu un sistem electric de ajustare a înălțimii și un mecanism central de frânare. Mecanismul E-move asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția "gravitație zero" (*).

Suport cu mecanism de ajustare a înălțimii

- Construcție metalică sudată stabil, standard cu 2 suporturi pentru stativ de perfuzie (Ø 19 mm) și suporturi pentru tetiera detașabilă.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- 4 roți de design Levina Ø 125 mm, cu sistem de frânare centrală activat prin pedale de frână. Pedalele de design au o poziție centrală pe ambele părți ale scaunului, ușor accesibile când vă aflați în fața scaunului.
- Mecanism stabil de ajustare a înălțimii prin intermediul brațelor egale de susținere.
- Ajustarea înălțimii de la 53 până la 77 cm (înălțime șezut) se realizează cu ajutorul unei telecomenzi.
- Suport pentru picioare extensibil, sintetic, cu o structură antiderapantă.
- Datorită capacului sintetic de design, chiar și suprafețele greu accesibile pot fi curățate cu ușurință.

Șezut

- Șezut detașabil, realizat din placă MDF melaminat de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar și suport pentru gambe

- Realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Bară de împingere sintetică și ergonomică la spate.
- Realizat dintr-o placă de placaj de 10 mm, tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

Mecanism E-move

- 2 motoare înclină spătarul, șezutul și suportul pentru gambe în poziția *gravitație zero* (*).
- Spătarul și suportul pentru gambe sunt reglabile individual.
- Unghiul dintre șezut și spătar este cuprins între 97° (poziția de ședere) și 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.
- Activarea se face cu ajutorul unei telecomenzi (ajustarea înălțimii și mecanismul de relaxare).

Cotiere ajustabile pe înălțime

- Designul ergonomic al cotelierelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide pentru reglarea pe înălțime a cotelierelor în 4 poziții diferite.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, cotelierile se află la același nivel cu șezutul.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.


(*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



Dimensiuni

16655 | Avento E-move reglabil pe înălțime:

- L 73 x D 85-158 x H 128-152 cm
- Înălțime șezut: 53 - 77 cm
- Adâncime șezut: 52 cm
- Lățime șezut: 53 cm
- Înălțime cotiere: 72 - 53 cm
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

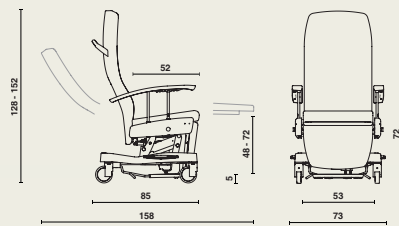

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Lemn: placaj, MDF.
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă de șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Suport flexibil pentru telecomandă.
- Cotiere late pivotante.
- Suporturi pentru accesorii.
- Suport de fixare pentru centură de siguranță.
- Suporturi laterale la cap.
- Spătar cu tetieră detașabilă.
- Tava de servit masa Elice.
- Stativ de perfuzie (1 sau 2 secțiuni).
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Suport recipient urină și / sau cilindru oxigen.
- Baterie Li-Ion.
- Echipat cu o pernă pentru cap / gât ajustabilă și detașabilă.
- Suport pentru stativ Ø 32 mm pe ambele părți.
- Suport pentru stativ Ø 32 mm pe partea dreaptă (Ø 19 mm în partea stângă).

