

Domus Classic Flex

- 08901** Ideea centrală din spatele scaunului de relaxare Domus este de a oferi un confort optim pentru o ședere liniștită. Mecanismul Classic poate fi ajustat cu ușurință prin împingerea în scaun. Manipulările cu maneta aparțin trecutului.

Suport

- Lateralele rotunjite constau din 2 plăci OSB de 18 mm și sunt conectate stabil la o structură metalică.
- Lateralele sunt tapițate cu spumă ignifugă.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Cotiere rotunjite, confortabile de \pm 5 cm.
- Elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Fără elemente de fixare vizibile.
- Roți de design Ø 65 mm cu frână (pentru mutarea scaunului fără pacient).
- Opțional, este posibil cu picioare din fag masiv cu roți auxiliare la spate.

Șezut

- Șezut detașabil din placă MDF melaminat, cu grosime de 12 mm.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Înălțime confortabilă a șezutului de 45 cm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar

- Spătarul este realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic, cu grosime de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 3 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Echipat cu pernă pentru gât ajustabilă și detașabilă.

Suport gambe

- Placaj, grosime 10 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

Poziții ajustabile

- 3 poziții: poziția de ședere, poziția de citire și poziția de relaxare.
- Mecanismul de relaxare ridică mai întâi picioarele, după care este posibilă înclinarea spătarului.
- Ușor de ajustat prin împingerea în scaun.
- Ajustabil fără a fi nevoie de utilizarea unei manete.
- Confort optim al șezutului în fiecare poziție, datorită unghiului constant dintre spătar și șezut în timpul înclinării.
- Sprijin optim datorită suportului telescopic pentru gambe.
- În poziția de șezut, suportul pentru gambe este rotit spre interior pentru a facilita ridicarea de pe scaun.

Culori


Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.



Dimensiuni

08901 | Domus Classic Flex

- L 62 x D 73 x H 115 cm
- Înălțime șezut: 45 cm
- Adâncime șezut: 51 cm
- Lățime șezut: 52 cm
- Înălțime cotiere: 63 cm
- Sarcina de lucru sigură: 135 kg

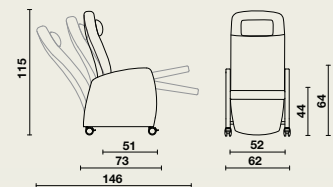

Materiale și finisaje

- Lemn: fag masiv, placaj, OSB, MDF.
- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Cotiere sintetice / din lemn.
- Bloc de abducție cu tava de servit masa.
- Pernă șezut cu spumă visco-elastică și husă bi-elastică.
- Pernă de reducere anatomică.
- Suporturi laterale la cap.
- Cotiere cu tapițerie detașabilă.
- Suport de fixare stativ de perfuzie.
- Stativ de perfuzie.
- Picioare din lemn și roți ajutătoare la spate.
- Roți de design ø 100 mm cu frână.
- Roți de design ø 100 mm cu frână și 2 roți direcționale.
- Suport pentru picioare.

