

Domus e-move Flex

15038 Ideea centrală din spatele scaunului de relaxare Domus este de a oferi un confort optim pentru o ședere liniștită. Domus E-move este echipat cu spătar și suport pentru gambe ajustabile electric, ușor de operat cu ajutorul unei comenzi manuale integrate.

Suport

- Lateralele rotunjite constau din 2 plăci OSB de 30 mm și sunt conectate stabil la o structură metalică.
- Lateralele sunt tapițate cu spumă ignifugă.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Cotiere rotunjite, confortabile de ± 5 cm.
- Atașamente pentru tava de servit masa.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Fără elemente de fixare vizibile.
- Roți de design $\varnothing 65$ mm cu frână.
- Opțional, este posibil cu picioare din fag masiv cu roți auxiliare la spate.

Șezut

- Șezut detașabil din placă MDF melaminat, cu grosime de 12 mm.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Înălțime confortabilă a șezutului de 45 cm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar și suport gambe

- Spătarul este realizat dintr-o coajă de placaj preformată ergonomic, cu grosime de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 3 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Echipat cu pernă pentru gât ajustabilă și detașabilă.

Mecanism E-move:

- 2 actuatore înclină spătarul, șezutul și suportul pentru gambe în poziția 'gravitație zero' (*).
- Spătarul și suportul pentru gambe sunt ajustabile individual.
- Unghiul dintre șezut și spătar variază de la 97° (poziția de ședere) la 120° (poziția 'gravitație zero').
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.
- Scaunul poate fi ajustat prin intermediul unei comenzi manuale integrate în partea dreaptă a scaunului, sau prin intermediul unei telecomenzi intuitive (opțional).

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.


(*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



Dimensiuni

15038 | Domus e-move Flex

- L 62 x D 73 x H 115 cm
- Înălțime șezut: 45 cm
- Adâncime șezut: 51 cm
- Lățime șezut: 52 cm
- Înălțime cotiere: 63 cm
- Sarcina de lucru sigură: 135 kg

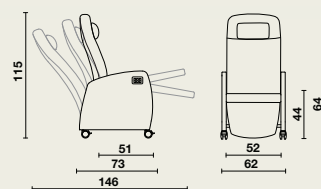

Materiale și finisaje

- Lemn: fag masiv, placaj, OSB, MDF.
- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Cotiere sintetice / din lemn.
- Dispozitiv anti-alunecare la tava de servit masa.
- Pernă șezut cu spumă visco-elastică și husă bi-elastică.
- Pernă de reducere anatomică.
- Suporturi laterale la cap.
- Bară de fixare pentru centura de siguranță.
- Cotiere cu tapițerie detașabilă.
- Suport de fixare stativ de perfuzie.
- Picioare din lemn și roți ajutoare la spate.
- Cârlig pentru tava de servit masa.
- Baterie.
- Roți de design $\varnothing 100$ mm cu frână.
- Roți de design $\varnothing 100$ mm cu frână și 2 roți direcționale.
- Suport pentru picioare (numai cu roți $\varnothing 100$ mm).
- Telecomandă cu fir.
- Tetieră detașabilă.

