

Domus Duo-line Flex

23000 Genieten van optimaal zitcomfort in alle rust en gezelligheid is de kerngedachte van de Domus relaxzetel. Het Duo-line mechanisme voorziet een individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer. De optionele "raising & sitting assist" biedt ergonomische ondersteuning bij het opstaan én neerzitten, dankzij de ondersteunende beweging van de zit.

Onderstel

- De afgeronde zijwanden bestaan uit 2 OSB platen van 30 mm en worden d.m.v. een stalen constructie stevig aan elkaar verbonden.
- Volledig beklede zijwanden met brandvertragend schuim en gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- Comfortabele afgeronde armsteunen van ± 4 cm.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Designwielen Ø 65 mm met rem.
- Optioneel mogelijk met massief beuken poten (licht conisch, ± 7 cm hoogte) voorzien van kunststof vloerbeschermers vooraan en achteraan met 2 geïntegreerde hulpwielen.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan zorgt voor een goede bloeddoodstrooming.
- Comfortabele zithoogte van 45 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel (enkel met wielen Ø 100 mm).
- Beensteun: multiplex plaat, dikte 10 mm, bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Duo-line mechanisme

- Individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.
- Kantelt afzonderlijk de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*).
- De gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van rugsteun en beensteun.
- Wanneer de rugsteun naar achter wordt geplaatst, inclineert de zitting mee van 8° tot 22°.
- Een hendel wordt gebruikt om rugsteun (rechterhendel) en beensteun (linkerhendel) te activeren en te vergrendelen in elke positie.
- Optimale ondersteuning van de benen dankzij telescopisch beensteun.
- De beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Kleuren


Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.



Afmetingen

23000 | Domus Duo-line Flex:

- B 63 x D 74 x H 122 cm
- Zithoogte: 45 cm
- Zitdiepte: 52 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 66 cm
- Veilig gewicht: 135 kg

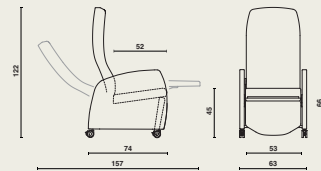

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Massieve beuk, Multiplex, OSB, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Houten / kunststof knoparmleggers.
- Eettafelbevestiging.
- Abductieklos in combinatie met eettafel.
- Zitkussen met een toplaag in 40 mm viscoelastisch schuim en bi-elastisch hoes (ook mogelijk op beensteun).
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Fixatiebeugel.
- Afneembare beklede armsteunen.
- Serumhuls en/of serumhouder Ø 19 mm.
- Houten poten met hulpwielen achteraan.
- Eettafelhouder op rug.
- Designwielen Ø 100 mm met rem.
- Designwielen Ø 100 mm met rem en richtingsvastzetter.
- Voetensteun (enkel met wielen Ø 100 mm).
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Raising & sitting assist.

