

ZenSo Ergo-line

Der ZenSo Ergo-line ist mit einem Relaxmechanismus ausgestattet, der speziell für den Pflegesektor entwickelt worden ist.

Der Ergo-line Mechanismus kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine "Zero Gravity" Position.

Fußgestell

- Solide, geschweißte Metallkonstruktion.
- 4 Linea Doppellaufrollen Ø 100 mm mit einzeln gebremsten Vorderrollen und zwei Richtungsrollen hinten. Die Hinterrollen sind zentral über Design-Bremspedale gebremst. Die Bremspedale befinden sich auf beiden Seiten des Sessels und sind von der Vorderseite leicht erreichbar.
- Fußgestell mit Epoxy-Beschichtung.
- Ausziehbare Fußstütze mit Kippschutz aus Kunststoff und Antirutsch-Struktur.

Rückenlehne

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff.
- Völlig gepolsterte Rückenlehne mit doppelter Steppnaht.

Sitz und Beinstütze

- Sitz und Beinstütze aus einem Stück, leicht abnehmbar ohne Werkzeug.
- Sitz und Beinstütze in MDF-Platte, Dicke 12 mm, gepolstert mit feuerhemmendem Schaum mit 3D-Struktur für optimalen Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Der abgerundete Sitz vorn behindert den Blutkreislauf nicht.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze (+70 mm), die auch Falten in der Polsterung verhindert.
- Sitzhöhe: freie Wahl (42,5 cm, 45 cm oder 47,5 cm)
- Wahl zwischen zwei verschiedenen Sitztiefen: 46 cm (small) oder 50 cm (large).

Höhenverstellbare Armlehnen

- Ergonomische Armlehnen erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Essbrettbefestigungen gehören zur Standardausstattung.
- Höhenverstellbare Holzarmlehnen in 4 Positionen mittels 2 massiver Stahlachsen.
- Verriegelung nach unten, mittels eines Federhebels.
- In niedrigster Position auf gleicher Höhe mit der Sitzfläche.

Ergo-Line Mechanismus:

- Kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine 'Zero Gravity' Position (*).
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 93° (Sitzposition) und 119° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 22 Grad, wenn der Relaxmechanismus aktiviert wird.
- Eine Gasfeder minimisiert die benötigte Betätigungskraft des Mechanismus.
- Verriegelung in jeder Position möglich, mittels eines Hebels, der von der rechten Seite einfach zu betätigen ist.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.

Farben

Bitten Sie uns um Unser reichhaltiges Angebot an Farben. Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.


(*) "Zero Gravity" Position möglich: Diese Sitz-/Liegeposition ist auf Daten der NASA gegründet. In dieser neutralen Körperposition befinden alle Muskelkräfte sich in einem biomedizinischen Gleichgewicht. Quelle: "From outer space to you", Omni, März 1994.



Maße

ZenSo Ergo-line:

- 71 x 82/151 cm
- Höhe: abhängig von der gewählten Rückenlehne
- Sichere Arbeitslast: 150 kg

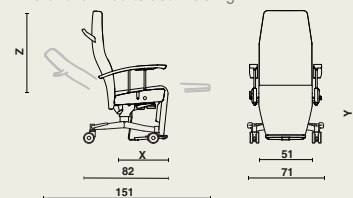

Sitztiefe X	Sitzhöhe Y*	Rückenlehne Z	Geeignet für Körpertyp
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

(*) Sitzhöhe gemessen ab Fußstütze

Materialien und Gestaltung

- Holz: Schichtholz, MDF-Platte.
- Metall: epoxybeschichtet (schwarz).
- Kunststoff.
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Anatomisches Reduktionskissen für Beinstütze.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Haken für Zubehör.
- Fixationsbügel
- Halter für Esstabled auf der Rückseite.
- Raising & Sitting assist.
- Gepolsterten Seiten.
- Gepolsterten Seiten und Armlehnen aus Kunststoff oder Holz.
- Antistatische Rolle
- Aufnahmehülse für Infusionshalter Ø 32 mm auf beiden Seiten
- Aufnahmehülse für Infusionshalter Ø 32 mm auf der rechten Seite (Ø 19 mm auf der linken Seite)

