

Litavo


09221 Het ideale hulpmiddel bij het lezen of bij het nuttigen van een maaltijd, zowel in bed als in de zetel. Het bovenblad, dat traploos in hoogte verstelbaar is, heeft een kantelbaar gedeelte dat dienst doet als leesstandaard.

Onderstel

- Stevig gelast U-vormig kader.
- De hoog/laag kolom bestaat uit 2 aluminium profielen en is telesopisch in de hoogte verstelbaar d.m.v. een gasveer.
- De kolom kan naar keuze aan de linker- of rechterkant op de voet voorzien worden.
- Een gasveer, bediend door een hendel ter hoogte van het vaste bladdeel, zorgt voor een traploze hoogteverstelling van ongeveer 69 cm tot 99 cm.
- Optioneel kan de U-vormige voet voorzien worden van twee roestvaststalen beschermkappen.
- Het metalen onderstel wordt beschermd door een epoxy-coating, *RAL 9006 blank alu.*
- De aluminium onderdelen worden beschermd door een anodisatielaag.
- Het geheel rust op 4 design wielen Ø 65 mm, waarvan 2 met rem.

Tafelblad


- Het blad bestaat uit een vast gedeelte en een kantelbaar gedeelte, beiden voorzien van een opstaande rand in kunststof.
- Het kantelbaar gedeelte wordt ondersteund door een aluminium profiel.
- Het blad is in 2 standen kantelbaar: 22,5° en 45°.
- Het kantelen gebeurt door een gemakkelijk bereikbare hendel aan het uiteinde van het blad.
- Het blad is vervaardigd uit een volkunststof, dikte 8 mm.

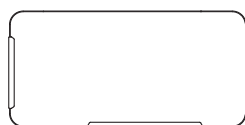


1-delig tafelblad symmetrisch



2-delig tafelblad links

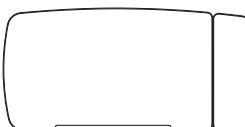

2-delig tafelblad rechts

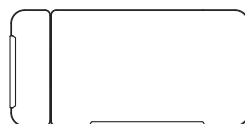

2-delig tafelblad symmetrisch





Afmetingen

09221 | L 89 x B 43 x H 69-98 cm

Tussenafstand voet: 68 cm

Hoogte voet: 10 cm

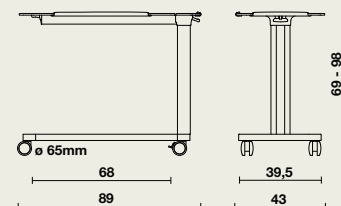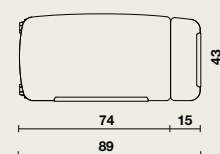

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating, *RAL 9006 blank alu.*
- Volkunststof.
- Kunststof.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Vast 1-delig tafelblad (niet kantelbaar, symmetrisch).
- Roestvast stalen beschermkappen.
- 2 ophanghaken op kolom.
- Bredere voet (+ 12 cm lengte), tussenafstand voet = 80 cm.
- Symmetrische uitvoering bovenblad.
- Galerijhouder op vast deel (enkel mogelijk indien symmetrisch bovenblad).
- Leessteun op tweede lange zijde (enkel mogelijk indien symmetrisch bovenblad).
- Leessteun op tweede korte zijde (enkel mogelijk indien symmetrisch bovenblad).

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

