

# Matris

Deze wieg voor pasgeborenen is ideaal om moeder en baby dichter bij elkaar te brengen na de geboorte, ook wel rooming-in genoemd.

## Wieg

- Wieg gemaakt uit kunststof structuur met neerklapbare zijwanden.
- De zijwanden zijn transparant, niet giftig en vervaardigd uit onbreekbaar plexiglas. De zijwanden zijn eenvoudig afneembaar om een vlotte desinfectatie te garanderen.
- Inclineerbaar ligvlak bestaande uit gelamineerde ligvlakplaat met ventilatie-openingen.
- Inclinatie van het ligvlak mogelijk tot +12° en -6°.
- Een matras met uitvouwbare zijleugels zorgt voor continuïteit tussen de matras van de wieg en van het bed.
- Een naamkaarthouder bevindt zich aan de voor- en achterzijde van de wieg.
- De wieg kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van het bed staan.
- De wieg is beschikbaar in 3 kleuren: blauw, groen en oranje.
- De wieg is standaard voorzien van twee veiligheidsriemen voor bevestiging aan het bed. Om veiligheidsredenen dient de hoogteverstelling geblokkeerd te worden tijdens het gebruik van riemen.


## Onderstel

- Het metalen onderstel wordt beschermd door een epoxy-coating, RAL 7035 en een kunststof afdekkap.
- Het onderstel rust op 4 zelfremmende tweelingwielen 100 mm. De remmen worden gedeblokkeerd door de duwbeugels van de wieg naar elkaar toe te bewegen.
- De hoogteverstelling gebeurt door middel van een gasveer die geactiveerd wordt met hendels aan hoofd- en voetenzijde van de wieg.



## Afmetingen

L 89 x B 52 x H 91/99 cm  
Hoogtevariatie ligvlak: ± 49 cm - ± 71 cm

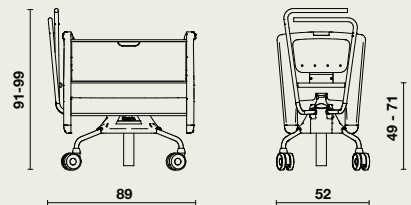

## Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating, RAL 7035.
- Kunststof: polyethyleen
- Plexiglas.
- Matras: polyurethaanschuim met brandvertragende hoes in polyester vezel.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

## Opties

- Mandje dat bevestigd kan worden aan voetenzijde.

