

Aron+ Daghospitaal bed

13360 Dankzij zijn smalle ligvlakbreedte is het Aron+ daghospitaal bed uitermate geschikt voor frequente verplaatsingen en ideaal voor gebruik in een dagziekenhuis.

Onderwagen

- Frame uit 2 aluminium lengteliggers met 2 stalen dwarsliggers.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot $\pm 16^\circ$.
- Integral S wielen \varnothing 150 mm op precisiekogellagers met centraal remmechanisme.
- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun (*).
- Batterij (*).
- Ligvlakdelen bestaan uit volkunststofplaten van 6 mm dik.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor fixatieriem.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- De brancard is standaard voorzien van Vela bedpanelen, duwbeugels zijn optioneel (*).
- Aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van 4 kunststof accessoirehaken aan elke zijde.

Elektrische manipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (*) of een *verpleegbox* (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en bediening onderbedlicht (*).
- Een *mini-verpleegbox* (*) of *verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Vela
- Jaro (*)
- Neerklapbare duwbeugels (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (enkel met Jaro-paneel, breedte: + 1 cm) (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 93 cm, Lengte: 212 cm
- Hoogtevariatie ligvlak (bij wielen \varnothing 150 mm): $\pm 40,5$ cm - $\pm 80,5$ cm
- Veilig gewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 200 x 79 cm
- Matrasmaat: 195 x 78 cm, dikte: 12 à 16 cm

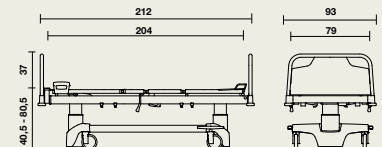

Materiaalgebruik en afwerking

- **Metaal:** epoxy-coating RAL 9006 alu, aluminium, chroom (*).
- **Kunststof / Volkunststof.**
- Zelfsmurende kunststoffscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I (aarding en equipotentiaal).
- Duwbeugels
- Vierdelig ligvlak
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox).
- Handbediening met selectieve blokkering.
- Handbediening met achtergrondverlichting.
- Mini-verpleegbox (ACC)
- Verpleegbox (ACO) + std handbediening + dekenrek.
- Nachlicht onder bed (3 LEDs).
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- (Elektro-)mechanische snelverstelling (CPR).
- Rembuzzer.
- 5^{de} wiel.
- Muurafstandhouder.
- Dubbel designpedaal aan hoofdeinde.
- Wielen \varnothing 200 mm.
- Comfort, Comfort plus of High comfort matras.
- Matras met stretcher cover.
- DIN rail (enkel aan voet indien dubbel rempedaal).

