

Lago Hospital

16514 Bij het Lago Hospital bed gaan veiligheid en comfort hand in hand. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een efficiënte zorg.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmensysteem.
- Trend - en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 17^\circ$.
- Integral S wielen $\varnothing 100$ mm, centraal geremd.
- Ergonomisch vormgegeven verchroomde rembeugel voor activering van het centrale remmechanisme.
- Rembeugel toegankelijk in alle bedposities.
- Tilliftoegankelijk.
- Bed is verplaatsbaar in iedere positie, behalve in de veiligheidspositie (= laagste positie).

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Een telescopische beveiliging van de rugsteun vermijdt inklemmingsgevaar van de patiënt tijdens inclinatie.
- De rugsteun is voorzien van een inclinatie indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$.
- Been- of voetsteun manueel verstelbaar.
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetsteun voorzien van 2 geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- Geïntegreerd stootwiel aan 4 bedhoeken.
- Bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg aan 4 bedhoeken.
- De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3 inox accessoirehaakjes.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (*) of een *verpleegbox* (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en bediening onderbedicht (*).
- Een *mini-verpleegbox* (*) of *verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.
- Een vergrendeldoos (*) blokkeert alle elektrische functies van de handschakelaar d.m.v. 1 draaiknop.

Paneeltypes

- Jaro

Onrusthekkens

- Trix (*)
- Twin (*)
- Atmosphere (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, lengte: 212 cm
- Hoogtevariatie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm
- Veilig gewicht: 250 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar)

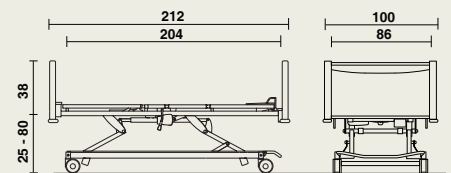

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal.
- Volkunststof.
- Epoxy-coating RAL 9006 alu of verchroomd.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Ligvlak met uitneembare kunststofplaten.
- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen, dikte 6 mm.
- Voetsteunverlenging tot 20 cm.
- Muurafstandhouder.
- Elektro-mechanische snelverstelling (CPR).
- Handbediening met selectieve blokkering.
- Verpleegbox (ACO) of mini-verpleegbox (ACC).
- Dekenrek.
- Nachtlucht onder bed (3 LEDs).
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- Linea tweelingwielen $\varnothing 125$ mm, centraal geremd.
- Linea tweelingwielen $\varnothing 150$ mm, centraal geremd.
- Rembuzzer.
- 5de wiel (enkel bij wielen $\varnothing 125$ of 150 mm).
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Elektrische beschermingsklasse I (aarding + equipotentiaal vereffeningspunt).

