

Bedgalg

01840 De patiënt beweegt zich comfortabel in het bed dankzij de bedgalg die toelaat zich zelfstandig op te trekken en te laten zakken.

Frame


- De bedgalg bestaat uit een geplooid dikwandige stalen buis \emptyset 32 mm.
- De metalen delen worden beschermd door een epoxy-coating.
- De bedgalg wordt m.b.v. een getande kunststof ring gemonteerd in de daarvoor voorziene hulzen in het bed.
- De getande ring zorgt ervoor dat de bedgalg per 30° kan verdraaid worden in de huls.
- De bedgalg is voorzien van een handgreep met manueel aanpasbaar ophanglint.
- Boven de geplooid buis zijn twee kunststof aanslagen gemonteerd waartussen het lint met handgreep kan opgehangen worden.



Afmetingen en prestaties

01840 | bedgalg

- hoogte: 130 cm.
- breedte: 75,5 cm.

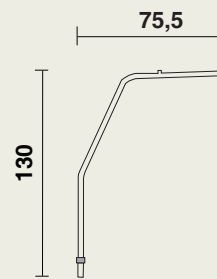

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: staal, chroom.
- Kunststof.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen

De bedgalg voldoet aan de norm **EN 60601-2-52**: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Automatisch oprolsysteem voor ophanglint.
- Afwerking in chroom.

