


2. GETEILTE SEITENSICHERUNG

Geteilte Seitengitter bieten nicht nur Flexibilität bei Bedarf, sondern auch viele Vorteile in den Bereichen Fallschutz, Mobilität und Autonomie der Patienten.

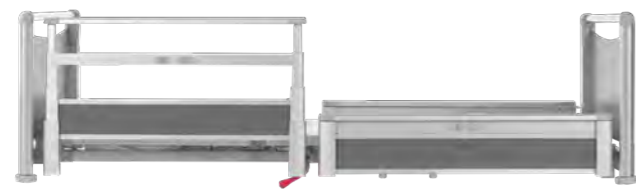

TWIN

Diese geteilten Seitengitter sind in **Einzel-** oder **Doppelversion** erhältlich. Die Doppelversion bietet Vollschutz über die gesamte Bettlänge. Twin Seitengitter können auch als Aufstehhilfe benutzt werden. Ein integriertes Sicherheitssystem beugt versehentliches Absenken der Seitengitter vor.

Max. Matratzenhöhe Twin Seitengitter: 18 cm.



DUOSAFE

DuoSafe Seitenteile schützen den Patienten über 3/4 der Bettlänge. Dank **der integrierten Bedieneinheiten (*)** können sowohl der Patient als auch das Pflegepersonal die Bettfunktionen und optionalen Zimmerausstattungen betätigen.

Max. Matratzenhöhe DuoSafe Seitengitter: 19 cm.

Auch wenn das Bett verlängert wird, entspricht es den Anforderungen der Sicherheitsnorm IEC 60601-2:52, weil die Lücke zwischen der Seitensicherung und dem Fußteil keine Einklemmgefahr darstellt (> 318 mm).

(*): Option

EINKLEMMGEFAHR VORBEUGEN IEC 60601-2-52

Alle geteilte Haelvoet Seitensicherungen entsprechen den Anforderungen der Sicherheitsnorm IEC 60601-2:52. Diese harmonisierte europäische Norm definiert den Abstand zwischen Seitengittern und Kopfteil (< 60 mm), zwischen Liegefläche und Seitengittern (< 120 mm), zwischen Seitenholmen (< 120 mm), zwischen geteilten Seitensicherungen (< 60 mm oder > 318 mm) und zwischen Seitengittern und Fußteil (< 60 mm oder > 318 mm).



TWIN

Vollschutz

Wenn das Bett verlängert wird, sollte ein Twin Erweiterungsstück benutzt werden, so dass eine optimale Sicherheit garantiert ist.

