



MAURO

gamme de fauteuils relax

CONTENU

Collection Mauro

La collection Mauro s'intègre parfaitement dans un environnement hospitalier, de soins ou de réadaptation.

L'HISTOIRE <i>La gamme la plus complète</i>	03	GAMME BARIATRIQUE <i>Confort XLarge</i>	12
MAURO EN UN COUP D'OEIL <i>Tous les modèles Mauro disponibles</i>	05	MATÉRIAUX & FINITION <i>Large choix</i>	13
MAKE IT YOURS <i>Configurez votre fauteuil</i>	06	MAURO EN PRATIQUE <i>Avantages et atouts</i>	14
OPTIONS & ACCESSOIRES <i>Aperçu</i>	10		



Haelvoet
Edition 2023
Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.
De petites nuances de couleur sont possibles.

L'histoire

Et si... tout était possible ? Haelvoet offre la **gamme de fauteuils de soins la plus complète** du marché.

LARGE ÉVENTAIL

Mauro, issu de notre célèbre fauteuil Fero, peut être équipé de 5 types de roues et de 3 mécanismes d'inclinaison. Mauro offre ainsi une réponse à tous les besoins en matière de soins, qu'il s'agisse d'un environnement hospitalier exigeant ou d'un établissement de soins ou de réadaptation.



PHILOSOPHIE DE CONCEPTION

Grâce à notre structure de production interne, nous pouvons répondre rapidement à diverses questions et souhaits. Nous sommes très fiers que le fauteuil Mauro est disponible avec **différents systèmes relax, manuels et électriques**, avec ou sans aide au redressement. De plus, un large choix de roues et d'options de finition permettent de personnaliser le fauteuil selon votre goût.

Mauro, issu de notre célèbre fauteuil Fero, offre une réponse à tous les besoins en matière de soins et s'intègre parfaitement dans chaque environnement de soins.

MOBILISATION ET AUTONOMIE

La mobilisation des patients est d'une importance fondamentale, c'est pourquoi Haelvoet a intégré **un système de redressement ingénieux** dans sa gamme Mauro. Le « raising & sitting assist » (*) facilite le lever et l'assise grâce au soutien offert par l'assise releveuse. Ensemble nous augmentons l'autonomie de l'utilisateur tout en donnant au personnel soignant la possibilité de se concentrer sur les soins.



DURABILITÉ

Haelvoet aspire à une **économie circulaire** et développe tous les produits de manière modulaire. Cela facilite le remplacement des pièces et augmente la durée de vie du produit. De plus, la modularité garantit une évolution du produit selon les souhaits et les besoins de l'utilisateur.

(*) : Option





MAURO

Profiter de son confort

Le fauteuil Mauro relax est parfaitement adapté aux besoins du patient qui bénéficie d'un soutien exceptionnel.



avec accoudoirs fixes

20000 Mauro Ergo-line

20003 Mauro Duo-line

21503 Mauro E-move



avec accoudoirs abaissables

16930 Mauro Ergo-line

18900 Mauro Duo-line

19102 Mauro E-move



avec accoudoirs fixes

20400 Mauro dossier inclinable

20004 Mauro fauteuil de repos



avec accoudoirs abaissables

20116 Mauro dossier inclinable

20119 Mauro fauteuil de repos

MAURO E-MOVE

Version électrique



Facile à utiliser grâce à une **télécommande intuitive** qui place le fauteuil dans la position souhaitée.

Avantage: plus d'autonomie pour le patient et commande centralisée.


En option avec batterie Li-ion.

FORME DU DOSSIER

Confort exceptionnel

La coque du siège a été conçue suivant la forme anatomique de la colonne vertébrale d'un adulte (en forme de S). Le dossier offre un **soutien exceptionnel** au niveau du bas du dos et des épaules.

Un coussin de nuque supplémentaire est possible, mais pas nécessaire.

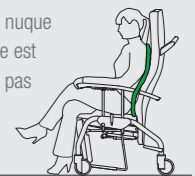


REPARTITION DE LA PRESSION

Soutien optimal

La mousse ignifugée en 2 densités différentes assure une bonne répartition de la pression et un excellent soutien du dos.

1. Centre: 25 kg/m³
2. Côtés: 45 kg/m³

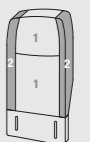

(*) les modèles ci-dessus peuvent contenir des options









MAKE IT YOURS

Configurez le fauteuil entièrement à votre goût

Le large choix de mécanismes relax, de roues, d'accoudoirs et d'options de finition vous permet d'adapter complètement le fauteuil à vos souhaits et besoins.

1. MÉCANISME RELAX

Choisissez parmi les différents types de mécanismes relax.

RELAX	Électrique	 Réglage synchrone et asynchrone	MAURO E-MOVE
	Manuel	 Réglage asynchrone	MAURO DUO-LINE avec raising & sitting assist
		 Réglage synchrone	MAURO ERGO-LINE avec raising & sitting assist
		 Réglage du dossier	MAURO ERGO-LINE
		 Réglage du dossier	MAURO AVEC DOSSIER INCLINABLE
REPOS	Fixe		MAURO FAUTEUIL DE REPOS

2. ROUES

Selon l'utilisation prévue du fauteuil, différentes options de roues sont possibles.

FREINAGE CENTRAL



Roues Ø 125 mm (repose-pieds incl.)

Ces roues à freinage central sont idéales pour une utilisation polyvalente. La pédale de frein s'utilise également pour activer les roues directionnelles. En option, une pédale de frein individuelle est possible à l'avant.



Roues Ø 300 mm (repose-pieds incl.)

Les grandes roues à l'avant, combinées aux roues adaptées à l'arrière, facilitent le franchissement des seuils et sont idéales pour des sols inégaux.

Uniquement possible avec des accoudoirs abaissables.

FREINAGE INDIVIDUEL



Roues Ø 100 mm (repose-pieds incl.)

Les roues à freinage individuel permettent un freinage individuel des quatre roues. Équipé d'un repose-pieds coulissant.



Roues Ø 65 mm

Convient parfaitement pour déplacer le fauteuil sans patient. Les roues sont équipées de freins individuels. Un repose-pieds n'est pas possible.



Roues Ø 65 mm avec pieds réglables en hauteur

Les pieds sont réglables de façon télescopique et permettent de régler la hauteur par intervalles de 2 cm, de 46 cm à 56 cm. Un repose-pieds n'est pas possible.

Uniquement possible avec des accoudoirs abaissables.

3. ACCOUDOIRS



ACCOUDOIRS ABAISSABLES

Abaissables en 3 hauteurs, la position la plus basse est à la même hauteur que l'assise. Cela simplifie un transfert horizontal du patient. Les accoudoirs sont toujours équipés d'une fixation pour la tablette repas.



ACCOUDOIRS FIXES

Les accoudoirs forment un ensemble avec les pieds et offrent un soutien optimal pour s'asseoir et se lever. Les accoudoirs sont toujours équipés d'une fixation pour la tablette repas.

4. RAISING & SITTING ASSIST



RAISING & SITTING ASSIST

Facilite l'assise et le lever

Les fauteuils Mauro Ergo-line et Duo-line peuvent être équipés en option de la fonction "raising & sitting assist" qui peut être facilement activée avec un levier supplémentaire. Le soutien offert par l'assise releveur permet de se lever et de s'asseoir de façon ergonomique pour le patient et le soignant.

	MAURO E-MOVE	MAURO DUO-LINE	MAURO ERGO-LINE	MAURO INCLINABLE	MAURO REPOS
AIDE POUR SE RELEVER					
Raising & sitting assist	×	○	○	×	×

○ : Possible × : Pas possible

Options et accessoires

Divers accessoires viennent compléter le fauteuil Mauro.



Tête amovible

Provision + coussin nuque

Appui-tête latéral

Support de fixation




Support pour tablette repas

Tablette repas Elice

Accoudoirs pour transfusion sanguine I

Accoudoirs pour transfusion sanguine II

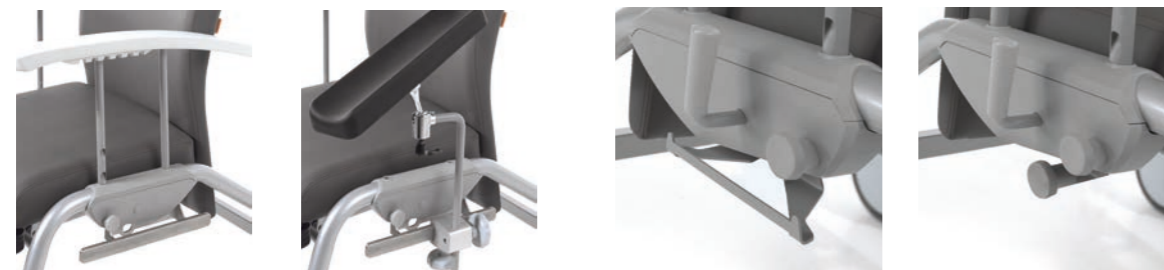

Rail DIN

Accoudoir pour transfusion sanguine III

Crochets pour accessoires

Verrouillage du levier



Pédale de frein double

Unité de lavage

Assise viscoélastique

Repose-jambes à réglage manuel

Options et accessoires

Divers accessoires viennent compléter le fauteuil Mauro.



Flexible pour télécommande E-move

Douille Ø 19 ou 32 mm

Porte-sérum Ø 19 ou 32 mm droit ou courbé

Porte-sérum réglable Ø 32 mm



Réducteur anatomique

Réducteur jambes

Protection en matière synthétique



Un excellent rapport qualité-prix ne porte pas préjudice à l'environnement, car Haelvoet accorde une grande importance à la durabilité, aux deux sens du terme. **Tous nos produits ont une longue durée de vie et sont délivrés avec une garantie de 15 ans sur les vices de construction.**

Les fauteuils Mauro sont fabriqués selon la norme ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016 et sont conformes aux Exigences essentielles de santé et de sécurité et à toutes les normes européennes qui sont d'application :

EN 16139 Meubles - résistance, durabilité et sécurité - Exigences pour les sièges à usage non domestique.

EN 1728 Ameublement - Sièges - Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité - Mobilier domestique.

EN ISO 14971 Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.

Le fauteuil **Mauro E-move** est conforme au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et à toutes les normes européennes qui sont d'application:

EN 60601-1 Appareils électro médicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.

EN 60601-1-2 Appareils électro médicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique - Exigences et essais.

EN ISO 14971 Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.



Gamme bariatrique

Le fauteuil Fero Obesitas allie une fonctionnalité exceptionnelle à une capacité de charge élevée, idéale pour les patients bariatriques.



Repose-pieds amovible (*)



Repose-jambes amovible (*)



Flexible pour commande manuelle (*)

FERO OBESITAS

Confort extra large

Le dossier inclinable électriquement et le revêtement de haute qualité offrent un grand confort pour une assise de longue durée. En outre, les accoudoirs abaissables facilitent les transferts. Les roues design Integral avec mécanisme de freinage central rendent le déplacement du patient plus aisé. Une batterie est possible en option (*).


Charge dynamique sécuritaire: 350 kg

(*) : Option

Matériaux et finitions

Grâce au large choix de couleurs, le fauteuil Mauro s'intègre parfaitement dans votre intérieur.

Similicuir Haelvoet Home Collection

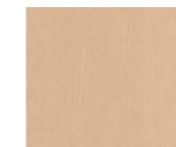

sandstone
code 960



sepia brown
code 962



camel
code 985



brick red
code 980



olive green
code 990



stormy blue
code 950




deep sea blue
code 954



midnight blue
code 952



concrete grey
code 970

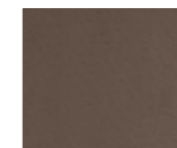

graphite grey
code 972



espresso brown
code 964



charcoal black
code 975

En option : choix parmi plusieurs catégories de prix.



Traitement standard Sanitized® sur le similicuir Haelvoet. Sanitized est le leader mondial dans le domaine de la protection hygiénique antimicrobienne.

Possibilités de finition

La collection Haelvoet vous offre un choix parmi 12 couleurs. Si vous le souhaitez, des solutions personnalisées sont possibles pour adapter le revêtement du fauteuil parfaitement à votre environnement de soins. Tous nos revêtements répondent aux exigences spécifiques du secteur des soins.

RÉSISTANCE AU FEU

Mousse et revêtement



La mousse de qualité des produits Haelvoet est **toujours ignifuge jusqu'au cœur**, tout comme notre vaste collection de similicuir. Classe de feu minimale : M2 (NFP 92.503) ou BS5852 + CRIB 5. Mousse et revêtement répondent aux normes EN1021-1 et EN1022-2. Choisir Haelvoet, c'est choisir un produit sûr.

MAURO

en pratique

REPOSE-JAMBES TÉLESCOPIQUE

Lorsque les fauteuils Mauro E-move et Duo-line sont inclinés, le **repose-jambes s'étend de 70 mm**. Cette fonction assure un soutien optimal des jambes et élimine les plis dans le similicuir au niveau des genoux, qui peuvent être à l'origine des escarres.



CHARGE DYNAMIQUE SÉCURITAIRE

La **charge dynamique sécuritaire** maximale des fauteuils relax et de repos Mauro est de 150 kg. En option, 200 kg est possible (uniquement pour Mauro Ergo-line).



RAISING & SITTING ASSIST

Les fauteuils Mauro Ergo-line et Duo-line peuvent être équipés en option de la fonction "**raising & sitting assist**" (*) qui peut être facilement activée avec un levier supplémentaire. Le soutien offert par l'assise releveur permet de se lever et de s'asseoir de façon ergonomique.



ASSISE AMOVIBLE

L'assise des fauteuils Mauro est **amovible sans outils** ce qui facilite l'entretien.

Une assise standard peut donc être remplacée très rapidement par une assise / repose-jambes anti-escarres avec mousse viscoélastique (*).

(*) : Option



MAURO E-MOVE

Mauro E-move est équipé d'un dossier et d'un repose-jambes réglables électriquement à l'aide d'une **télécommande intuitive**, soit séparément, soit simultanément.



Réglage du dossier



Réglage du repose-jambes



Réglage simultané du dossier et jambes

Une **batterie Li-ion** (*) garantit que le fauteuil peut fonctionner de manière autonome sans avoir besoin d'être branché électriquement.

Possibilité d'accrocher la commande manuelle sur le côté droit du fauteuil (en option des deux côtés). Un flexible pour télécommande (*) est également possible (voir aperçu des accessoires à la page 11).


REPOSE-JAMBES À RÉGLAGE MANUEL

Le Mauro Ergo-line peut être équipé d'un **repose-jambes à réglage manuel** (*) qui permet d'utiliser le repose-jambes indépendamment du mécanisme de relax. Le repose-jambes est réglable en 7 positions grâce à un système de crémaillère.



(*) : Option



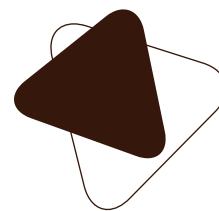

Haelvoet nv | **Belgique**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95
F +32 (0) 51 48 73 19
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Pays-Bas**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **France**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Suisse**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Roumanie**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro