

Avento

reglabil pe înălțime
cu frâne individuale

15610 Scaunul Avento este echipat cu un sistem de ajustare a înălțimii și roți cu frâne individuale. Mecanismul Ergo-line asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția "gravitație zero" (*).

Suport cu mecanism de ajustare a înălțimii

- Construcție metalică sudată stabil.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- 4 roți Levina Ø 100 mm, cu frâne individuale.
- Mecanism stabil de ajustare a înălțimii prin intermediul brațelor egale de susținere.
- Ajustarea înălțimii de la 48 până la 76 cm (înălțime șezut) se realizează prin intermediul pompei hidraulice activate cu ajutorul unor pedale situate pe ambele părți ale scaunului.

Șezut

- Șezut detașabil, realizat din placă MDF melaminat de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar și suport pentru gambe

- Realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Bară de împingere sintetică și ergonomică la spate.
- Realizat dintr-o placă de placaj de 10 mm, tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

Mecanism Ergo-line

- Asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția *gravitație zero* (*).
- Unghiul dintre șezut și spătar este cuprins între 97° (poziția de ședere) și 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Un piston reduce la minimum forța de activare necesară a mecanismului.
- Datorită unei manete de pe ambele părți, scaunul poate fi blocat în orice poziție.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.

Cotiere ajustabile pe înălțime

- Designul ergonomic al cotelierelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide pentru reglarea pe înălțime a cotelierelor în 4 poziții diferite.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, cotelierile se află la același nivel cu șezutul.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii


Referință la lista de accesorii.

(*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.

Dimensiuni

15610 | Avento Ergo-line reglabil pe înălțime:

- L 73 x D 85-156 x H 123-151 cm
- Înălțime șezut: 48 - 76 cm
- Adâncime șezut: 52 cm
- Lățime șezut: 53 cm
- Înălțime cotiere: 67 - 48 cm
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

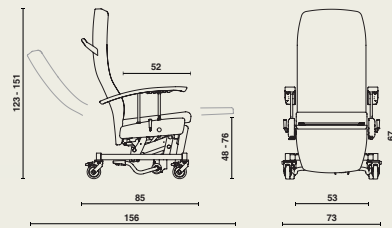

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică (gri deschis).
- Lemn: placaj, MDF.
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă de șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Cotiere late pivotante.
- Suporturi pentru accesorii.
- Suport de fixare pentru centură de siguranță.
- Suporturi laterale la cap.
- Spătar cu tetieră detașabilă.
- Ajutor de ridicare & așezare.
- Tava de servit masa Elice.
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Suport pentru stativ și stativ de perfuzie.
- Suporturi pentru tetiera detașabilă.
- Sistem de blocare pentru mecanismul Ergo-line.
- Echipat cu o pernă pentru cap / gât ajustabilă și detașabilă.

