

Mauro Ergo-line

16930 Scaunul Mauro este echipat cu un mecanism de relaxare special dezvoltat pentru sectorul de îngrijire. Mecanismul Ergo-line asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziție de "gravitație zero".

Suport

- Construcție metalică sudată stabil.
- 4 roți de design Levina S Ø 125 mm cu rulmenți de precizie; cele 2 roți din spate sunt echipate cu frână centrală și blocare direcțională.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Suport pentru picioare extensibil, sintetic, cu o structură antiderapantă.

Șezut

- Șezut detașabil, realizat din placă MDF melaminat de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Înălțime confortabilă a șezutului de 46 cm (de la suportul pentru picioare).
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar

- Realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Bară sintetică de împingere la spate.

Suport gambe

- Realizat dintr-o placă de placaj de 10 mm, tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

Cotiere ajustabile pe înălțime

- Designul ergonomic al coterelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide pentru reglarea pe înălțime a coterelor în 4 poziții diferite.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, coterile se află la același nivel cu șezutul.

Mecanism Ergo-line

- Spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția *gravitație zero* (*).
- Unghiul dintre șezut și spătar este cuprins între 97° (poziția de ședere) și 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Un piston reduce la minimum forța de activare necesară a mecanismului.
- Cu ajutorul unei manete din partea dreaptă, scaunul poate fi blocat în orice poziție.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.


(*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



Dimensiuni

16930 | Mauro Ergo-line:

- L 72 x D 78-155 x H 125 cm
- Înălțime șezut de la suport picioare: 46 cm
- Înălțime șezut fără suport picioare: 50 cm
- Adâncime șezut: 51 cm
- Lățime șezut: 53,5 cm
- Înălțime cotiere: 70,5-50 cm
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

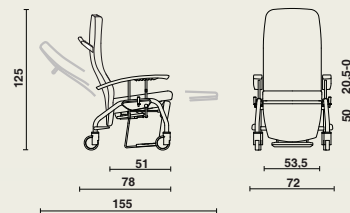

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică.
- Lemn: placaj, MDF.
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Mecanism de blocare pentru manetă.
- Suport gambe reglabil manual.
- Pernă șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Cotiere late pivotante.
- Cârlige pentru accesorii.
- Suport de fixare pentru centura de siguranță.
- Suporturi laterale la cap.
- Suport de fixare stativ de perfuzie.
- Tetieră detașabilă.
- Pedală dublă de frână.
- Roată spate antistatică (cu roți Ø 125 mm).
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Prevăzută pentru perna de gât.
- Pernă pentru gât ajustabilă și detașabilă.
- Roți Ø 65 mm cu frâne individuale, fără suport picioare.
- Roți Ø 65 mm cu frâne individuale, picioare ajustabile, fără suport pentru picioare.
- Roți Levina Ø 100 mm cu frâne individuale.
- Roți Integral S Ø 125 mm cu frâne individuale pe roțile din față.
- Roți față Ø 300 mm.
- Ajutor de ridicare & așezare.

