

ZenSo Duo-line

20107 Scaunul ZenSo este echipat cu un mecanism de relaxare special dezvoltat pentru sectorul de îngrijire. Mecanismul Duo-line permite ajustarea separată a spătarului și a suportului de gambe prin intermediul unor pistoane. Atunci când se ajustează spătarul, șezutul se înclină simultan.

Suport

- Construcție din oțel sudată stabil, prevăzută cu 2 suporturi de fixare stativ de perfuzie (Ø 19 mm).
- 4 roți duble Linea Ø 100 mm; cele 2 roți din față au frână centrală și blocare direcțională. Pedalele de frână sunt situate pe ambele părți ale scaunului, ușor accesibile.
- Finisat cu vopsea epoxidică.
- Suport pentru picioare extensibil, sintetic, cu o structură antiderapantă.

Spătar

- Realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Bară de împingere sintetică și ergonomică la spate.
- Complet tapițat cu cusături decorative.

Șezut și suport gambe

- Șezutul și suportul pentru gambe formează o unitate, ușor de îndepărtat fără a fi nevoie de unelte.
- Șezutul și suportul pentru gambe sunt realizate din placă MDF de 12 mm, acoperită cu spumă ignifugă cu structură 3D pentru a garanta un confort excelent.
- Complet tapițate cu cusături decorative.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Suport pentru game telescopic (+70 mm), ceea ce ajută și la prevenirea încrețiturilor în tapițerie.
- Posibilitate de a alege înălțimea șezutului datorită unui distanțier (42,5 cm, 45 cm sau 47,5 cm).
- Se poate alege între 2 adâncimi diferite ale șezutului: 46 cm (mică) sau 50 cm (mare).

Cotiere ajustabile pe înălțime

- Designul ergonomic al cotierylor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide, vopsite epoxidic, pentru reglarea pe înălțime a cotierylor în 4 poziții diferite.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, cotieryle se află la același nivel cu șezutul.

Mecanism Duo-line

- Ajustare individuală a spătarului și a suportului pentru gambe prin intermediul unor pistoane.
- Pistoanele reduc la minimum forța de activare necesară a mecanismului.
- Atunci când mecanismul de relaxare a spătarului este activat, unghiul șezutului se înclină de la 7° la 20°.
- Maneta din dreapta se utilizează pentru reglarea spătarului, iar cea din stânga pentru suportul de gambe.
- Scaunul poate fi blocat în orice poziție.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii


Referință la lista de accesorii.



Dimensiuni

ZenSo Duo-line

- L 71 x D 82-151cm
- Înălțime: depinde de înălțimea spătarului
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

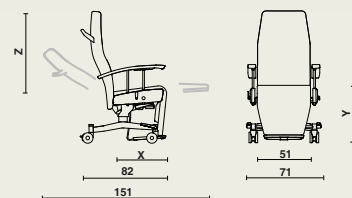

Dimensiuni

Adâncime șezut X	Înălțime șezut Y	Înălțime spătar Z	Potrivit pentru tipul de corp
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

Materiale și finisaje

- Lemn: placaj, MDF.
- Metal: vopsea epoxidică (negru).
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă șezut cu spumă viscoelastică și husă bi-elastică.
- Suport gambe cu pernă de reducere anatomică.
- Spătar cu tetieră detașabilă.
- Cârlige pentru accesorii.
- Suport de fixare pentru centură de siguranță.
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Ajutor de ridicare & așezare.
- Laterale închise, tapițate.
- Laterale închise, tapițate cu cotiere din lemn / material sintetic.
- Cotiere din lemn ajustabile pe înălțime.
- Roată față antistatică.
- Suport fixare stativ Ø 32 mm pe ambele părți.
- Suport fixare stativ Ø 32 mm pe partea dreaptă.

