

ZenSo Ergo-line

19107 Scaunul ZenSo este echipat cu un mecanism de relaxare special dezvoltat pentru sectorul de îngrijire. Mecanismul Ergo-line asigură că spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziție de "gravitație zero".

Suport

- Construcție din oțel sudată stabil, prevăzută cu 2 suporturi de fixare stativ de perfuzie (Ø 19 mm).
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- 4 roți duble Linea Ø 100 mm cu sistem central de frânare și blocare direcțională. Pedalele de frână sunt situate central pe ambele părți ale scaunului, accesibile din toate direcțiile.
- Suport pentru picioare extensibil, sintetic, cu o structură antiderapantă.
- Datorită capacului sintetic, chiar și suprafețele greu accesibile pot fi curățate cu ușurință.

Spătar

- Realizat dintr-o coajă de placaj preformat ergonomic de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Bară de împingere sintetică și ergonomică la spate.
- Complet tapițat cu cusături decorative.

Șezut și suport gambe

- Șezutul și suportul pentru gambe formează o unitate, ușor de îndepărtat fără a fi nevoie de unelte.
- Șezutul și suportul pentru gambe sunt realizate din placă MDF de 12 mm, acoperită cu spumă ignifugă cu structură 3D pentru a garanta un confort excelent.
- Complet tapițate cu cusături decorative.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Suport pentru game telescopic (+70 mm), ceea ce ajută și la prevenirea încrețiturilor în tapițerie.
- Posibilitate de a alege înălțimea șezutului datorită unui distanțier (42,5 cm, 45 cm sau 47,5 cm).
- Se poate alege între 2 adâncimi diferite ale șezutului: 46 cm (mică) sau 50 cm (mare).

Cotiere ajustabile pe înălțime

- Designul ergonomic al coterelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide, vopsite epoxidic, pentru reglarea pe înălțime a coterelor în 4 poziții diferite.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, coterile se află la același nivel cu șezutul.

Mecanism Ergo-line

- Spătarul, șezutul și suportul pentru gambe se înclină simultan în poziția *gravitație zero* (*).
- Unghiul dintre șezut și spătar este cuprins între 93° (poziția de ședere) și 119° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 22°.
- Un piston reduce la minimum forța de activare necesară a mecanismului.
- Cu ajutorul unei manete din partea dreaptă, scaunul poate fi blocat în orice poziție.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.


(*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



Dimensiuni

ZenSo Ergo-line

- L 68 x D 71-151 cm
- Înălțime: depinde de înălțimea spătarului
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

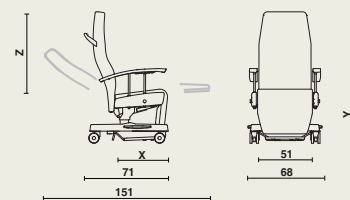

Dimensiuni

Adâncime șezut X	Înălțime șezut Y	Înălțime spătar Z	Potrivit pentru tipul de corp
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

Materiale și finisaje

- Lemn: placaj, MDF.
- Metal: vopsea epoxidică (negru).
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă șezut cu spumă viscoelastică și husă bi-elastică.
- Suport gambe cu pernă de reducere anatomică.
- Spătar cu tetieră detașabilă.
- Cârige pentru accesorii.
- Suport de fixare pentru centură de siguranță.
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Ajutor de ridicare & așezare.
- Laterale închise, tapițate.
- Laterale închise, tapițate cu cotiere din lemn / material sintetic.
- Roată față antistatică.
- Suport fixare stativ Ø 32 mm pe ambele părți.
- Suport fixare stativ Ø 32 mm pe partea dreaptă.

