



MAURO

relax zetel gamma

INHOUD

Mauro collectie

De Mauro collectie van Haelvoet past naadloos in een veeleisende ziekenhuis-, zorg- of revalidatieomgeving.

THE STORY <i>Compleet gamma zorgzetels</i>	03	OBESITAS GAMMA <i>XLarge comfort</i>	12
MAURO OVERZICHT <i>Alle beschikbare Mauro modellen</i>	05	MATERIALEN & AFWERKING <i>Ruime keuze</i>	13
MAKE IT YOURS <i>Configureer uw zetel</i>	06	MAURO IN ACTIE <i>Voordelen en troeven</i>	14
OPTIES & ACCESSOIRES <i>Overzicht</i>	10		



Haelvoet
Uitgave 2023
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

The Story

What if... anything is possible? Haelvoet biedt het **meest complete gamma zorgzetels** van de markt aan.

RUIM GAMMA

Mauro, geëvolueerd uit de succesvolle Fero zetel, is mogelijk met maar liefst 5 verschillende wieltypes en 3 relaxmechanismen. Zo biedt Mauro een antwoord op elke zorgbehoefte, van een veeleisende ziekenhuisomgeving tot een zorg- of revalidatie-instelling.



EIGEN ONTWERPFILOSOFIE

Dankzij eigen ontwikkeling en productie kan snel en flexibel ingespeeld worden op diverse vragen en wensen. Zo zijn we heel trots dat de Mauro zetel mogelijk is met **diverse manuele en elektrische relaxsystemen** al dan niet voorzien van een opstahulp. Een brede keuze aan wielen en afwerkingsmogelijkheden laat bovendien toe de zetel volledig te personaliseren.

Mauro, geëvolueerd uit de succesvolle Fero zetel, biedt een antwoord op elke zorgbehoefte en past naadloos in een veeleisende ziekenhuis-, zorg- of revalidatieomgeving.

MOBILISATIE EN ZELFREDZAAMHEID

Patiënten mobiliseren is van fundamenteel belang en daarom integreerde Haelvoet een uniek **opstahulpsysteem** in het Mauro gamma. De "raising & sitting assist" (*) vergemakkelijkt het opstaan én het neerzitten dankzij een ondersteunende beweging van de zitting. Meer zelfredzaamheid creëren voor de gebruikers en ondersteuning bieden aan zorgverleners blijft onze drijfveer.



DUURZAAMHEID

Haelvoet streeft naar **circulariteit** en ontwikkelt alle producten op een modulaire wijze. Hierdoor kunnen onderdelen gemakkelijk vervangen worden teneinde de levensduur van het product te verhogen. Bovendien garandeert de modulariteit dat het product kan meevolueren met de wensen en behoeften van de gebruiker.

(*) Optie





MAURO

Geniet van comfort

De Mauro relaxzetel is volledig afgestemd op de behoeften van de zorgvrager en ondersteunt het lichaam uitzonderlijk goed.



met vaste armen

21503	Mauro E-move
20003	Mauro Duo-line
20000	Mauro Ergo-line
23501	Mauro Classic



met neerschuifbare armen

19102	Mauro E-move
18900	Mauro Duo-line
16930	Mauro Ergo-line
23500	Mauro Classic



met vaste armen

20004	Mauro rustzetel
20400	Mauro kantelbare rug



met neerschuifbare armen

20119	Mauro rustzetel
20116	Mauro kantelbare rug

MAURO E-MOVE

Elektrische variant

Eenvoudig te bedienen door een intuïtieve handbediening die de zetel in een handomdraai naar de gewenste positie brengt. Voordeel: meer autonomie voor de patiënt en een gecentraliseerde bediening.


Optioneel met Li-Ion batterij.

VORM VAN DE RUG

Uitmundend comfort

De speciaal ontworpen ruggschelp van de Mauro zetel volgt de vorm van de menselijke ruggengraat (S-vorm). De rugsteun biedt een uitzonderlijke ondersteuning ter hoogte van de onderrug, maar ook aan de schouders.

Een extra nekkussen is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

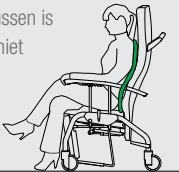


GOEDE DRUKVERDELING

Optimale ondersteuning

Brandvertragend schuim in twee verschillende densiteiten zorgt voor een goede drukverdeling en een uitstekende rugondersteuning.

1. Midden: 25 kg/m³
2. Zijkanten: 45 kg/m³

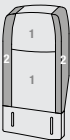

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten



MAKE IT YOURS

Configureer de zetel volledig naar wens

De ruime keuze aan relaxmechanismes, onderstellen, wielen en afwerkingsopties laten toe om de zetel volledig af te stemmen op uw wensen en behoeften.

1. RELAXMECHANISME

Maak een keuze uit de diverse types relaxmechanismes.

RELAX	Elektrisch	 Asynchrone en synchrone verstelling	MAURO E-MOVE
	Manueel	 Asynchrone verstelling	MAURO DUO-LINE met raising & sitting assist
			MAURO DUO-LINE
		 Synchrone verstelling	MAURO ERGO-LINE met raising & sitting assist
			MAURO ERGO-LINE
			MAURO CLASSIC met raising & sitting assist
			MAURO CLASSIC
		 Enkel rug	MAURO MET KANTELBAARE RUG
RUSTZETEL	Vast		MAURO RUSTZETEL

2. WIELEN

Afhankelijk van het beoogde gebruik van de zetel zijn er diverse wielen mogelijk.

CENTRALE REM

	Wielen Ø 125 mm (incl. voetensteun) Deze centraal geremde wielen zijn ideaal voor multifunctioneel gebruik. Het rempedaal achteraan wordt eveneens gebruikt om de richtingswielen te activeren. Optioneel is een individuele rempedaal vooraan mogelijk.
	Wielen Ø 300 mm (incl. voetensteun) De grote wielen vooraan, in combinatie met aangepaste wielen achteraan, vergemakkelijken het nemen van drempels en oneffenheden. Enkel mogelijk met neerschuifbare armen.

INDIVIDUELE REM

	Wielen Ø 100 mm (incl. voetensteun) De individueel geremde wielen maken het mogelijk de vier wielen individueel te remmen. Standaard voorzien van een uitschuifbare voetensteun.
	Wielen Ø 65 mm Uitermate geschikt voor kleine verplaatsingen van de zetel zonder patiënt. De wielen zijn voorzien van een individuele rem. Een uitschuifbare voetensteun is niet mogelijk.
	In hoogte verstelbare poten incl. wielen Ø 65 mm De poten zijn telescopisch verstelbaar en laten toe om de zithoogte per 2 cm te verstellen van 46 cm tot 56 cm. Een uitschuifbare voetensteun is niet mogelijk. Enkel mogelijk met neerschuifbare armen.

3. ARMSTEUNEN



NEERSCHUIFBARE ARMEN

Neerschuifbaar in 3 standen, waarbij de laagste stand op gelijke hoogte komt als het zitvlak. Dit vereenvoudigt een horizontale transfer van de patiënt. De armen zijn standaard voorzien van een eettafelbevestiging.



VASTE ARMEN

De armsteunen vormen één geheel met de poten en bieden een optimale steun bij het in- en uitstappen. De armen zijn standaard voorzien van een eettafelbevestiging.

4. RAISING & SITTING ASSIST



RAISING & SITTING ASSIST

Vereenvoudigt zitten én opstaan

Zowel de Mauro Classic, Ergo-line als Duo-line zetel kan optioneel voorzien worden van een "raising & sitting assist" die eenvoudig d.m.v. een extra hendel geactiveerd wordt. Door de ondersteunende beweging van de zit wordt het opstaan én het neerzitten extra ergonomisch ondersteund.

	MAURO E-MOVE	MAURO DUO-LINE	MAURO ERGO-LINE	MAURO CLASSIC	MAURO KANTELB.	MAURO RUSTZETEL
OPSTAHULPSYSTEEM						
Raising & sitting assist	×	○	○	○	×	×

○ : Mogelijk × : Niet mogelijk

Opties en accessoires

Diverse accessoires maken de Mauro zetel compleet.

			
Afneembaar hoofd	Voorziening + nekkussen	Schoudersteunen	Fixatiebeugel
			
Eettafelhouder	Elice eettafel	Bloedtransfusie arm I	Bloedtransfusie arm II
			
DIN rail	Bloedtransfusie arm III	Accessoirehaken	Vergrendeling bediening
			
Dubbele rempedaal	Individuele rem vooraan	Visco-elastische zitting	Manueel bijstelbaar beensteun

Opties en accessoires

Diverse accessoires maken de Mauro zetel compleet.

			
Flexibele houder E-move	Serumhuls Ø 19 of 32 mm	Serumhouder Ø 19 of 32 mm recht of gebogen	Verstelbare serumhouder Ø 32 mm
			
Anatomische reductor	Reductor been	Kunststof beschermhoes	Hoofdwas-unit



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 15 jaar garantie op constructiefouten.

De Mauro zetels worden vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en zijn in overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en alle van toepassing zijnde Europese normen:

EN 16139 Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor zitplaatsen voor niet huishoudelijk gebruik.

EN 1728 Meubelen - Zitmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en de duurzaamheid.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

De Mauro E-move zetels zijn daarnaast in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese normen:

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

EN 60601-1-2 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.



Obesitas gamma

De Fero Obesitas zetel combineert een uitzonderlijke functionaliteit met een hoog draagvermogen, ideaal voor bariatrische patiënten.



Afneembare
voetensteun*



Afneembare beensteun*



Flexibele
handschakelaarhouder*

FERO OBESITAS Extra large comfort

De elektrisch kantelbare rug en de hoogwaardige bekledingsmaterialen bieden een hoog comfort bij langdurig zitten, terwijl de neerschuihbare armen een vlotte transfer mogelijk maken. De Integral designwielen met centraal remmechanisme laten een eenvoudige verplaatsing van de patiënt toe.




Veilig werkgewicht: 350 kg

(*) : Optie

Materialen en afwerking

Dankzij de ruime kleurkeuze kan de Mauro zetel volledig geïntegreerd worden in uw interieur.

Haelvoet Home Collection kunstleder

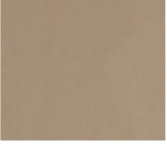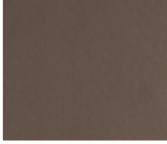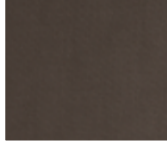 sandstone code 960	 sepia brown code 962	 camel code 985	 brick red code 980
 olive green code 990	 stormy blue code 950	 deep sea blue code 954	 midnight blue code 952
 concrete grey code 970	 graphite grey code 972	 espresso brown code 964	 charcoal black code 975

Optioneel: keuze uit verschillende prijscategorieën.

Bekledingsmogelijkheden

De Haelvoet Home Collection biedt een keuze uit 12 kleuren kunstleder. Indien gewenst, zijn klantspecifieke oplossingen mogelijk passend bij de totale inrichting van uw zorgomgeving. Al onze bekledingen voldoen aan de specifieke eisen van de zorgsector.

BRANDVERTRAGEND Schuim en bekleding



Het kwaliteitsschuim van de Haelvoet producten is **standaard brandvertragend tot in de kern** net zoals onze ruime kunstledercollectie. Min. klasse: M2 (NFP 92.503) of BS5852 + CRIB 5. Schuim en bekleding voldoen aan EN1021-1 en EN1022-2. Kiezen voor Haelvoet is kiezen voor een veilig product.

MAURO

in actie

TELESCOPISCH BEENSTEUN

Bij de Mauro E-move, Duo-line en Classic zetel **verlengt de beensteun met 70 mm** tijdens inclinatie. Deze functie zorgt voor een optimale ondersteuning van de benen en elimineert spanning ter hoogte van de knieholtes die aan de basis kan liggen van decubitus.

VEILIG WERKGEWICHT

Het maximaal **veilig gewicht** van de Mauro relax- en rustzetels bedraagt 150 kg. Optioneel is 200 kg mogelijk (enkel voor Mauro Ergo-line).

RAISING & SITTING ASSIST

Zowel de Mauro Classic, Ergo-line als Duo-line zetel kan optioneel voorzien worden van een **raising & sitting assist** (*) die eenvoudig met een extra hendel geactiveerd wordt. Door de ondersteunende beweging van de zit wordt het opstaan én het neerzitten extra ergonomisch ondersteund.



AFNEEMBARE ZITTING

De zitting van alle Mauro zetels is **eenvoudig afneembaar** en dit zonder gereedschap teneinde de zetel goed te kunnen reinigen.

Een standaard zitting kan hierdoor uiterst snel vervangen worden door een anti-decubitus zitting met visco-elastisch schuim (*).

(*): Optie



MAURO E-MOVE

Bij de Mauro E-move zijn rug- en beenverstelling eenvoudig elektrisch te bedienen door een **intuïtieve handbediening**, zowel afzonderlijk als gelijktijdig.



Rugverstelling



Beensteunverstelling



Rug en beensteun gelijktijdig

Een optionele **Li-ion batterij** (*) zorgt dat de zetel autonoom kan werken, overal vlot inzetbaar is en er geen elektriciteit in de onmiddellijke omgeving vereist wordt.

Een ophangmogelijkheid voor de handschakelaar is voorzien aan de rechterzijde van de zetel (optioneel aan beide zijden). Ook een flexibele handschakelaarhouder (*) is mogelijk (zie overzicht accessoires op blz. 11).


MANUEEL BIJSTELBAAR BEENSTEUN

Op Mauro Ergo-line zorgt een **manueel bijstelbaar beensteun** (*) dat de beensteun onafhankelijk van het relaxmechanisme kan gebruikt worden. De beensteun is in zeven posities verstelbaar.



(*): Optie



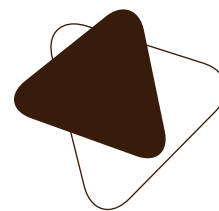

Haelvoet nv | **België**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95

info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Nederland**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **France**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Suisse**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Romania**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro