



ZENSO

Relaxsesselkollektion

INHALT

ZenSo Kollektion

Die Haelvoet Zenso Kollektion ist äußerst vielseitig, funktionell und bietet für jede Umgebung die passende Lösung.

| | |
|--|-----------|
| THE STORY <i>Was wäre, wenn... alles möglich ist?</i> | 03 |
| ZENSO E-LIFT <i>Elektrisch mit Liftfunktion</i> | 04 |
| ZENSO E-MOVE <i>Elektrisch</i> | 06 |
| ZENSO ERGO-LINE / DUO-LINE <i>Manuell</i> | 08 |
| SICHER AUFSTEHEN UND SITZEN <i>E-lift Mechanismus Raising & sitting assist</i> | 10 |
| MAKE IT YOURS <i>Konfigurieren Sie Ihren Sessel</i> | 12 |
| ZUBEHÖR <i>Übersicht</i> | 16 |
| INFUSIONSSTÄNDER UND HALTER <i>Große Auswahl</i> | 17 |
| ZENSO IN DER PRAXIS | 18 |



Haelvoet
Edition 2025
Haelvoet behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
Leichte Farbabweichungen sind möglich.

The Story

Der ZenSo Kollektion zielt darauf ab, das **umfassendste Angebot an Pflegesesseln auf dem Markt** anzubieten.

GROSSE AUSWAHL

Mit einer großen Auswahl an Sesseln, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität, Ästhetik und Innovation darstellt, wollen wir allen Bedürfnissen in höchstem Maße gerecht werden.



EIGENE DESIGNPHILOSOPHIE

Was wäre, wenn... alles auf allen Plätzen möglich ist? Dank unserer firmeninternen Entwicklung und Produktion können wir schnell und flexibel auf die unterschiedlichsten Anforderungen und Wünsche reagieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass der ZenSo Sessel mit **verschiedenen manuellen und elektrischen Relaxsystemen** ausgestattet werden kann, mit oder ohne Aufstehhilfe. Eine große Auswahl an Rollen und Verarbeitungsmöglichkeiten für Armlehnen und Polsterung ermöglichen eine völlig individuelle Gestaltung des Sessels.

FUNKTIONALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

Da die Mobilisierung von Patienten von grundlegender Bedeutung ist, hat Haelvoet **ausgeklügelte Aufstehhilfen** in seine ZenSo Kollektion integriert. Der "raising und sitting assist" erleichtert das Aufstehen und Hinsetzen durch eine unterstützende Bewegung des Sitzes. Außerdem gibt es den innovativen E-Lift-Mechanismus. Wenn die E-Lift-Funktion betätigt ist, kommt ein automatisches Bremssystem zum Einsatz. Von dieser sicheren Position aus wird der Benutzer vom Sitzen in dem Stehen oder umgekehrt gebracht.



Haelvoet strebt eine **Kreislaufwirtschaft** an und entwickelt alle Produkte modular. Dadurch können Teile leicht ersetzt werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Außerdem sorgt die Modularität dafür, dass sich das Produkt mit den Wünschen und Bedürfnissen des Nutzers weiterentwickeln kann.

ÄSTHETIK

Der ZenSo Sessel verbindet Ergonomie mit Ästhetik und kann viele Formen annehmen. Dank der großen Auswahl an Armlehnen, Fußgestellen und Verarbeitungen, passt der ZenSo Sessel **sowohl zu Hause als auch in verschiedenen Pflegeeinrichtungen**. Unsere Motivation ist und bleibt es, den Nutzern mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen und die Pflegekräfte zu unterstützen.

Die ZenSo Kollektion befindet sich an der Kreuzung zweier Welten: wenn Innovation und Design aufeinandertreffen.





ZENTRALBREMSE
Betätigung in 1 Bewegung


ABSENKBARE ARMLEHNEN
Vereinfacht Transfers



ZENSO E-LIFT

Ref. 19108

Nach einer Operation ist es wichtig, sich so schnell wie möglich zu rehabilitieren. Dank der erhöhten Selbstständigkeit wird die Genesung beschleunigt und haben die Patienten eine schnellere Aussicht auf Genesung. Der ZenSo E-Lift ist ein ideales Hilfsmittel für Personen mit (vorübergehend) eingeschränkter Mobilität. Durch die elektrische Unterstützung hilft der ZenSo Sessel dem Benutzer, selbständig in den Sessel ein- und auszusteigen.

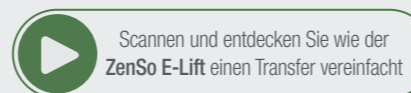

E-LIFT

Maximale Funktionalität

- + Liftfunktion + automatische Bremsfunktion
- + Elektrisch und taktil
- + Handbedienung oder integrierte Bedienung
- + Die magnetische Stromverbindung garantiert eine Abroll- und Stolpersicherung
- + Dank der Li-Ion Batterie ist Strom nicht nötig (*)



(*): Option

ARMLEHNEN AUS KUNSTSTOFF
Einfache Reinigung

**HÄUSLICHE
AUSSTRAHLUNG**
*Gepolsterte Armlehnen
und integrierte Bedienung*

ZENSO E-MOVE

Ref. 20052

Menschen müssen sich wohlfühlen in einer neuen Umgebung, und ein Sessel kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Der ZenSo E-move verbindet eine häusliche Ausstrahlung mit Komfortmerkmalen, die die Selbstständigkeit des Benutzers erhöhen und ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit garantieren.

E-MOVE *Komfort und Ruhe*

- + Elektrisch und taktil
- + Große Auswahl an Fußgestellen
- + Handbedienung oder integrierte Bedienung
- + Die magnetische Stromverbindung garantiert eine Abroll- und Stolpersicherung
- + Dank der Li-Ion Batterie ist Strom nicht nötig (*)

(*): Option



Magnetische Stromverbindung



HÄUSLICHE AUSSTRAHLUNG
Gepolsterte Armlehnen

OFFENES FUSSGESTELL
Einfache Reinigung

ZENSO ERGO-LINE

Ref. 19107

Ein Sessel sollte zugänglich und intuitiv zu bedienen sein. Der Ergo-line-Relaxmechanismus neigt gleichzeitig die Rücken- und die Beinstütze und ist mittels eines ergonomischen Hebels leicht zu betätigen.

Synchrone Bewegung



- + Synchrone Bewegung der Rücken- und Beinstütze
- + Raising & sitting assist (*)
- + Einfach zu betätigen mittels eines ergonomischen Hebels

ZENSO DUO-LINE

Ref. 20107

Der separat verstellbare Mechanismus ermöglicht es, die Beinstütze beim Lesen oder Fernsehen getrennt von der Rückenlehne zu verstellen.

Separat verstellbar



- + Separat Verstellbarkeit der Rücken- und Beinstütze
- + Raising & sitting assist (*)
- + Einfach zu betätigen mittels zwei ergonomischer Hebel

(*): Option

1. E-LIFT MECHANISMUS

Die Liftfunktion des ZenSo E-Lift-Sessels unterstützt den Benutzer optimal. Der Sessel bremst automatisch dank des SafeBrake-Bremssystems.



AUTOMATISCHES BREMSSYSTEM

Die automatische Bremsfunktion sorgt dafür, dass die Rollen automatisch gebremst werden (SafeBrake) wenn die Aufstehfunktion betätigt wird.




HANDBEDIENUNG ODER INTEGRIERTE BEDIENUNG

Auswahl zwischen Handbedienung mit Spiralschnur oder integrierte Bedienung (nur mit gepolsterten Armlehnen).



2. RAISING & SITTING ASSIST

Dank der unterstützenden Bewegung des "raising & sitting assist" wird sowohl das Aufstehen als auch das Hinsetzen einfacher.

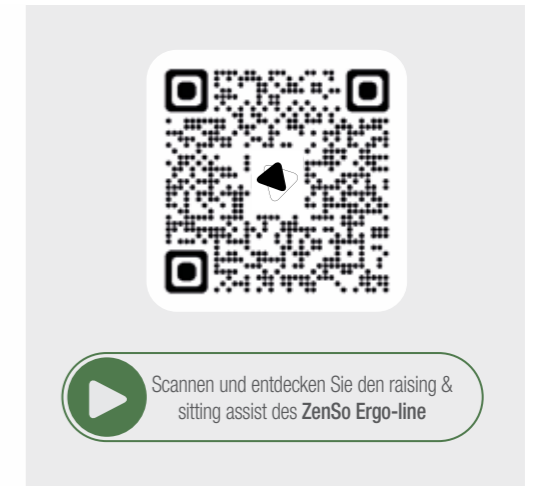

RAISING & SITTING ASSIST

Sowohl der ZenSo Ergo-line als auch der Duo-line-Sitz können optional mit einem 'raising & sitting assist' ausgestattet werden, der mit einem zusätzlichen Hebel einfach betätigt werden kann. Durch die unterstützende Bewegung des Sitzes wird das Aufstehen und Hinsetzen zusätzlich ergonomisch unterstützt.



| | ZENSO E-LIFT | ZENSO E-MOVE | ZENSO ERGO-LINE | ZENSO DUO-LINE | ZENSO RUHESESSEL |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| AUFSTEHHILFEN | | | | | |
| E-lift Mechanismus | ● | × | × | × | × |
| Raising & sitting assist | × | × | ○ | ○ | × |

● : Standard ○ : Möglich × : Nicht möglich


MAKE IT YOURS

Konfigurieren Sie den Sessel ganz nach Ihren Wünschen

Die große Auswahl an Relaxmechanismen, Fußgestellen, Rollen und Verarbeitungsmöglichkeiten ermöglicht es Ihnen, den Sessel ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.

1. RELAXMECHANISMUS

Wählen Sie aus den unterschiedlichen Relaxmechanismen.

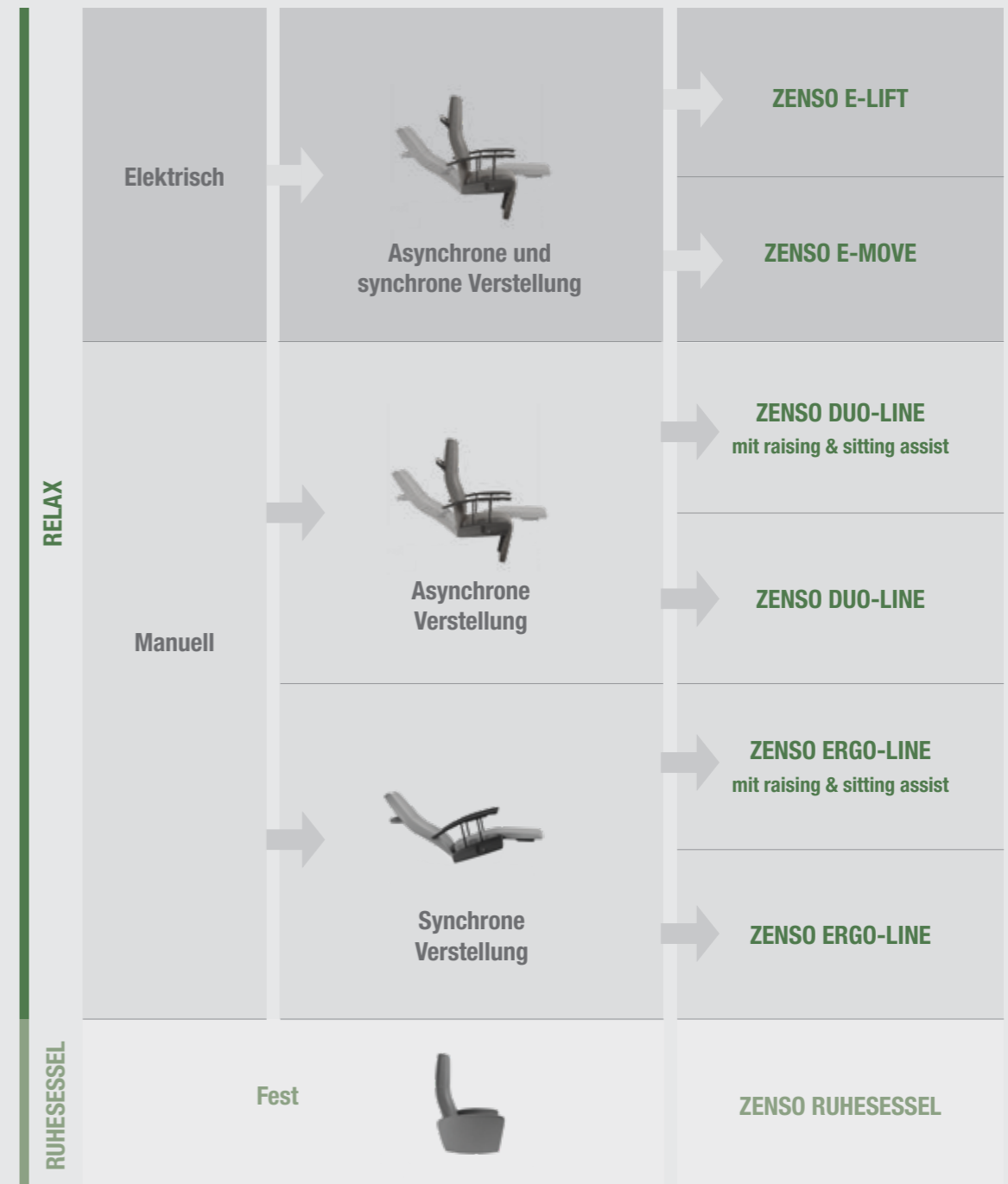

2. FUSSGESTELL

Abhängig vom gewählten Relaxmechanismus sind mehrere Fußgestelltypen mit oder ohne Rollen möglich.

| FUSSGESTELL | | ZENSO E-LIFT | ZENSO E-MOVE | ZENSO ERGO-LINE | ZENSO DUO-LINE | ZENSO RUHESESSL |
|---|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
|  | niedriger Fuß | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Rollen Ø 65 mm, individuelle Bremse, auf niedrigem Fuß | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | hoher Fuß | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Rollen Ø 65 mm, individuelle Bremse, auf hohem Fuß | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Rollen Ø 100 mm, individuelle Bremse und mit Fußstütze | × | ○ | ○ | ○ | × |
|  | Rollen Ø 100 mm, Zentralbremse auf 2 Vorderrollen, individuelle Bremse hinten und mit Fußstütze | × | ○ | ○ | ○ | × |
|  | Rollen Ø 100 mm, Zentralbremse auf 4 Rollen und mit Fußstütze | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|  | Rollen Ø 300 mm, Rollen Ø 150 mm hinten mit Zentralbremse, mit schockabsorbierendem Element, mit Fußstütze | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

○ : Möglich × : Nicht möglich


3. ARMLEHNEN



ABSENKBARE ARMLEHNEN

Vereinfachen Transfers

Absenkbare Armlehnen sind möglich mit Verarbeitung aus Holz oder Kunststoff. Die Armlehnen können in 3 Positionen abgesenkt werden.

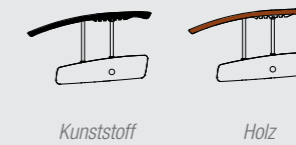

FESTE GEPOLSTERTE SEITEN

Maximale Häuslichkeit

Die gepolsterten Seiten sind mit oder ohne Armlehnen aus Kunststoff oder Holz erhältlich.



(*): Nicht möglich mit ZenSo Ruhesessel

4. SITZHÖHE UND SITZTIEFE



| Sitzhöhe* | Sitztiefe | Für Körpergröße geeignet |
|-----------|-----------|--------------------------|
| 42,5 cm** | 46 cm | < 164 cm |
| 45 cm | 46 cm | 164 - 176 cm |
| 45 cm | 50 cm*** | 164 - 176 cm |
| 47,5 cm | 50 cm*** | > 176 cm |

















(*): Sitzhöhe gemessen ab Fußstütze (falls vorhanden)

(**): Nicht möglich mit E-lift Mechanismus

(***): Nicht möglich mit ZenSo Ruhesessel

Zubehör

Unterschiedliches Zubehör macht den ZenSo Sessel komplett.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Abnehmbare Kopfstütze | Element für Nackenkissen | Nackenkissen | Fixationsbügel |
|  |  |  |  |
| Esstabletthalter | Elice Esstablett | Armenlehne für Bluttransfusion I | Armenlehne für Bluttransfusion II |
|  |  |  |  |
| DIN-Schiene | Armenlehne für Bluttransfusion III | Persönliche Tischplatte | Zubehörhaken |
|  |  |  |  |
| Kopfwashbecken | Anatomisches Reduktionskissen | Viskoelastischer Sitz | Sauerstoffflaschenhalter Ø 19 mm / Ø 32 mm |

Halter für Infusionsständer

Für jeden Fußgestelltyp gibt es verschiedene Optionen.



Infusionsständer Ø 19 mm

Infusionsständer Ø 32 mm

| | 19 MM | 32 MM |
|---|-------|-------|
| Fußgestelltyp | | |
| Ohne Rollen | × | × |
| Rollen Ø 65 mm | × | × |
| Rollen Ø 100 mm, individuelle Bremse | ○ | × |
| Rollen Ø 100 mm, Zentralbremse auf 2 Rollen | ● | ○ |
| Rollen Ø 100 mm, Zentralbremse auf 4 Rollen | ● | ○ |
| Rollen Ø 300 mm | ○ | ○ |

●: Standard ○: Option ×: Nicht möglich

ZENSO

In der Praxis

TELESKOPISCHE BEINSTÜTZE

Während der Neigung **verlängert die Beinstütze sich um 70 mm**. Diese Funktion unterstützt die Beine optimal und entfernt Falten in den Kniekehlen, die Dekubitus verursachen können.



SITZ UND BEINSTÜTZE VÖLLIG ABNEHMBAR

Der Sitz und die Beinstütze können **in einem Stück ohne Werkzeug abgenommen werden**, um den Sessel zu reinigen. Außerdem ist die Unterseite des Sitzes und der Beinstütze in der gleichen Ausführung wie die Oberseite gepolstert.

Ein Standardsitz kann daher sehr schnell durch einen Anti-Dekubitus-Sitz/eine Beinstütze mit viskoelastischem Schaum (*) ersetzt werden.

BREMSE UND RICHTUNGSFESTSTELLER AN DEN VORDERROLLEN

Eine Bremse und ein Richtungsfeststeller an den Vorderrollen eines Pflegesessels sorgen für zusätzliche Stabilität, einfachere Manövrierbarkeit und weniger körperliche Belastung. Ideal bei Transfers und in engen Räumen: sicher für den Benutzer, komfortabel für die Pflegekraft.



FEUERHEMMENDER SCHAUM UND POLSTERUNG

Der hochwertige Schaum der Haelvoet Produkte ist **standardmäßig feuerhemmend bis zum Kern**, ebenso wie unsere umfangreiche Kunstlederkollektion.



Mindestklasse: M2 (NFP 92.503) oder BS5852 + CRIB 5.
Schaum und Polsterung: EN1021-1 en EN1022-2.
Wer ein Haelvoet Produkt wählt, wählt ein sicheres Produkt.

Auf Wunsch sind auch kundenspezifische Lösungen möglich, um die Gesamtausstattung Ihrer Pflegeumgebung anzupassen.

REINIGUNG OHNE VERSCHIEBUNG

Auch bei dem ZenSo-Sessel ohne Rollen kann das Reinigungspersonal dank einer **freien Höhe von 13 cm** problemlos unter dem Sessel reinigen. Die gesamte Sesselkollektion ist durch das durchdachte Design und die glatten Oberflächen extrem schnell und einfach zu reinigen.



Scannen und entdecken Sie den Transfer vom Stuhl zum ZenSo E-lift



Scannen und entdecken Sie den Transfer vom ZenSo E-Lift zum Bett



Ein ausgezeichnetes Preis-Qualitätsverhältnis geht bei Haelvoet nicht auf Kosten der Umwelt, denn Haelvoet hält **Dauerhaftigkeit** – in beiden Bedeutungen des Wortes – sehr hoch. Alle Haelvoet Produkte haben eine lange Lebensdauer. Außerdem gewährt Haelvoet 15 Jahre Garantie auf Konstruktionsfehler.

Die ZenSo Sesselkollektion werde gemäß der Norm ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 hergestellt und entspricht die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen und allen anderen geltenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 16139 : 2013 Möbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit - Anforderungen an Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich.

EN 1728 : 2012 Möbel - Sitzmöbel - Prüfverfahren zur Bestimmung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit.


EN 1022 : 2005 Wohnmöbel - Sitzmöbel - Bestimmung der Standsicherheit.



Dank unserer modernen, umweltfreundlichen Produktionsprozesse, einer maximalen Verwendung recycelbarer Materialien, und unseres PEFC-Zertifikates sind Haelvoet Produkte ehrliche Produkte.



(*): Option

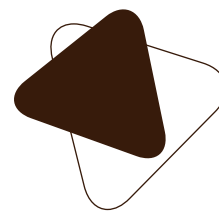

Haelvoet nv | **Belgien**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95

info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Die Niederlande**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **Frankreich**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Schweiz**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Rumänien**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro