

ZenSo Duo-line

20107 De ZenSo relaxzetel is uitgerust met een speciaal voor de zorg ontwikkeld mechanisme. Het Duo-line mechanisme voorziet een individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie, standaard voorzien van 2 serumhulzen (Ø 19 mm).
- 4 Linea tweelingwielen Ø 100 mm met 2 richtingswielen vooraan, de wielen langs voor zijn centraal geremd d.m.v. design rempedalen. De rempedalen bevinden zich aan beide zijden van de zetel en zijn gemakkelijk bereikbaar langs de voorzijde.
- Afgewerkt met epoxy-coating.
- Uitschuifbaar voetensteun met opstapbeveiliging in kunststof met antislipstructuur.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Ergonomische kunststof duwbeugel.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.

Zitting en beensteun

- Zitting en beensteun bestaan uit één geheel, eenvoudig afneembaar zonder gereedschap.
- Zitting en beensteun zijn gemaakt uit plaatmateriaal, dikte 12 mm, bekleed met brandvertragend traagschuim met 3D structuur voor een optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- De afgeronde zitting bevordert de bloeddorstroming.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij telescopisch beensteun (+70 mm), waardoor ook geen plooiën in de bekleding ontstaan.
- Vrije keuze zithoogte d.m.v. een spacer (42,5 cm, 45 cm of 47,5 cm).
- Keuze uit 2 verschillende zitdieptes: 46 cm (small) of 50 cm (large).

Neerschuihbare armen

- Ergonomische kunststof knoparmleggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- De armen zijn standaard voorzien van een eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve stalen assen.
- Vergrendeling d.m.v. een veerhendel.
- De armen komen in laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.

Duo-line mechanisme:

- Individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.
- De gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van rugsteun en beensteun.
- Wanneer de rugsteun naar achter wordt geplaatst, inclineert de zitting mee van 7° tot 20°.
- Een hendel wordt gebruikt om rugsteun (rechter hendel) en beensteun (linker hendel) te activeren en te vergrendelen in elke positie.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen

ZenSo Duo-line:

- B 71 x D 82-151 cm
- Hoogte: afhankelijk van gekozen rughoogte
- Veilig gewicht: 150 kg

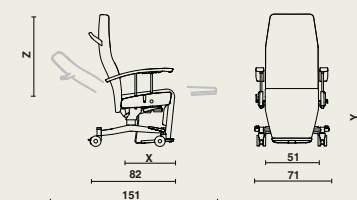

Keuzemogelijkheid:

Zitdiepte X	Zithoogte Y*	Rughoogte Z	Geschikt voor lichaamslengte
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

(*) Zithoogte vanaf voetensteun

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zit- en beensteun met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Beensteun met anatomische reductor.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Eettafelhouder op rug.
- Opstahulp.
- Gesloten, gestoffeerde armen.
- Gesloten, gestoffeerde armen met kunststof of houten opdek.
- Neerschuihbare houten armen.
- Antistatisch wiel vooraan.
- Serumhuls Ø 32 mm aan beide zijden.
- Serumhuls Ø 32 mm aan rechterzijde (Ø 19 mm aan linkerzijde).

