

Aris Care

10010 Le lit Aris Care est un lit robuste et confortable. Le dossier inclinable en option est facile à manipuler grâce à la manette bilatérale.

Panneau de tête/pied de lit

- Pieds en hêtre massif.
- Pieds coniques.
- Panneaux de lit en aggloméré mélaminé encastré.
- Les pieds sont équipés de patins en matière synthétique.
- Les panneaux de lit sont fixés sur le sommier à l'aide de boulons.


Sommier

- Sommier métallique en une ou deux (*) parties.
- Standard pourvu d'alvéoles pour les ceintures de contention.
- Le sommier métallique est fait d'un cadre en tube carré auquel les profils arrondis en acier, de 70 mm de large, sont soudés.
- Le vérin à gaz est activé par une manette bilatérale.
- Cette construction garantit une grande solidité, associée à une capacité de nettoyage rapide et une aération optimale du matelas.
- A la tête du sommier sont deux douilles prévues pour porte-sérum ou potence de lit (uniquement possible avec un sommier en 2 parties).
- Le dossier peut s'incliner jusqu'à $\pm 70^\circ$ (à l'aide d'un vérin à gaz) (uniquement possible avec un sommier en 2 parties).



Dimensions

- Largeur : 94 cm, Longueur : 210 cm
- Hauteur sommier : ± 41 cm
- Dimensions du sommier : 204 x 90 cm
- Dimensions du matelas : 195 x 90 cm, épaisseur : 12 à 15 cm

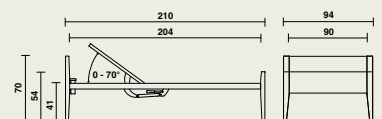

Matériel utilisé et finition

- **Bois** : Hêtre (massive, contre-plaqué), en aggloméré (mélaminé).
- **Métal**: revêtement époxy RAL 9006 alu Blanc.
- **Matière synthétique**.
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** : voir nos fiches matériaux.
Pour **les couleurs** : voir notre large gamme.

Options

- Sommier en 2 parties avec relève-buste inclinable.
- Longueur du sommier +20 cm
- Combinaison panneau pied bas – panneau tête haut.
- Combinaison panneau pied haut – panneau tête haut.
- Latte en bois pour cadre de lit.
- Support pour bouteille d'oxygène (\varnothing 147mm, H 222 mm)

Panneaux

- Panneau Aris Care

Accessoires

Nous référons à notre liste d'accessoires.

(*) Option

