

Domus Duo-line Flex

23000 In aller Seelenruhe und Gemütlichkeit optimalen Sitzkomfort genießen: Das ist der Kerngedanke des Domus Ruhesessels. Der Duo-line Mechanismus ermöglicht es, die Rückenlehne und Beinstütze separat zu verstellen. Die optionale "Raising & Sitting Assist" bietet ergonomische Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen – dank der unterstützenden Bewegung der Sitzfläche.

Gestell

- Die abgerundeten Seitenteile sind aus 2 OSB-Platten (Dicke: 30 mm) hergestellt und mittels einer Stahlkonstruktion stark miteinander verbunden.
- Komplett gepolsterte Seitenteile mit feuerhemmendem Schaum und doppelter Steppnaht.
- Komfortable abgerundete Armlehnen (± 4 cm).
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- Keine Sichtbare Befestigungspunkte.
- Design Laufrollen Ø 65 mm mit Bremse.
- Beine aus massiven Buchenholz (leicht konisch) mit Gleitern aus Kunststoff (vorn) und 2 integrierte Laufrollen (hinten) sind auf Anfrage erhältlich.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Der abgerundete Sitz behindert den Blutkreislauf nicht.
- Komfortable Sitzhöhe (45 cm).
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.

Rückenlehne und Beinstütze

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 3 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Mit einem höhenverstellbaren und abnehmbaren Kopfstütz-/Nackenkissen ausgestattet.
- Beinstütze: Schichtholz, Dicke 10 mm und mit feuerhemmendem Schaum gepolstert.

Duo-line Mechanismus

- Die Rückenlehne, Sitzfläche und Beinstütze können separat geneigt werden – bis in eine entspannende „Zero Gravity“-Position (*).
- Eine Gasdruckfeder minimiert die benötigte Betätigungskraft und ermöglicht eine stufenlose Verstellung der Rücken- und Beinstütze.
- Wird die Rückenlehne nach hinten geneigt, folgt die Sitzfläche mit einer Neigung von 8° bis 22° .
- Die Rückenlehne (rechter Hebel) und die Beinstütze (linker Hebel) werden jeweils über einen Hebel aktiviert und lassen sich in jeder Position arretieren.
- Dank der teleskopischen Beinstütze werden die Beine optimal unterstützt.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.

Farben


Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.



Maße

23000 | Domus Duo-line Flex:

- B 63 x T 74 x H 122 cm
- Sitzhöhe: 45 cm
- Sitztiefe: 52 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Höhe der Armlehnen: 66 cm
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

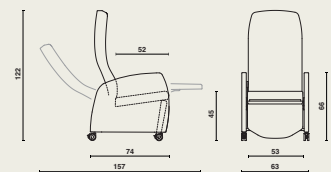

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv), Schichtholz, MDF-Platte, OSB.
- Metal: epoxybeschichtet (schwarz).
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Holz- oder Kunststoff Armlehnen.
- Esstabellett.
- Abduktionskeil in Kombination mit Esstabellett.
- Sitzpolster mit einer Oberschicht aus 40 mm viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug (auch möglich für Beinstütze).
- Anatomisches Reduktionskissen.
- Ohrenbacken.
- Fixationsbügel.
- Abnehmbare gepolsterte Armlehnen.
- Hülse für Infusionständer und/oder Infusionständer Ø 19 mm.
- Holzbeine mit Laufrollen hinten.
- Esstabellethalter an der Rückenlehne.
- Laufrollen Ø 100 mm mit Bremse.
- Laufrollen Ø 100 mm mit Bremse und Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze aus Kunststoff (nur mit Laufrollen Ø 100 mm).
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne (nur mit Laufrollen Ø 100 mm).
- Abnehmbares und verstellbares Kopf Nackenkissen.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Raising & sitting assist.

