

Domus E-move Soft

15032 Profiter d'un confort d'assise optimal, en tout repos et plaisir, est l'idée maîtresse du fauteuil relax Domus. Le mécanisme E-move est équipé d'un dossier et d'un repose-jambes réglables électriquement. L'inclinaison se fait à l'aide d'une commande intégrée facile à utiliser.

Châssis

- Les côtés arrondis sont faits de 2 plaques OSB de 30 mm et reliés par une structure en acier.
- Côtés recouverts de mousse anti-feu et de similicuir orné de piqûre décorative.
- Les accoudoirs confortables d'une largeur de ± 10 cm.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- Pas de points de fixation visibles.
- Pieds en bois massif, pourvus de patins synthétiques.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, 12 mm d'épaisseur.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Une hauteur d'assise confortable de 44 cm.
- Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Dossier et repose-jambes

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, 12 mm d'épaisseur.
- Recouvert de mousse anti-feu de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.
- Repose-jambes en multiplex, 10 mm d'épaisseur, recouvert d'une mousse ignifugée.

Le mécanisme E-move

- Incline simultanément le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position « zero gravity » (*) à l'aide de deux moteurs.
- Le dossier et le repose-jambes sont réglables individuellement.
- L'angle entre l'assise et le dossier varie d'au moins 99° dans la position assise jusqu'à 135° dans la position « zero gravity ».
- Quand le mécanisme relax se met en action, l'assise incline jusqu'à 22° au minimum.
- Le repose-jambes est incliné vers l'intérieur en position assise, pour faciliter le lever.
- La manipulation se fait à l'aide d'une commande intégrée au côté droit du fauteuil ou par une télécommande (option).

Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.


(*) Position « zero gravity » : cette position mi-assise, mi-allongée, inspirée de la NASA, est une position corporelle neutre, dans laquelle toutes les forces musculaires reposent dans un équilibre bio-médical. (Source : 'From outer space to you', Omni, Mars



Dimensions

Domus E-move Soft:

- B 75 x D 79 x H 122 cm
- Hauteur d'assise: 44 cm
- Profondeur d'assise: 51 cm
- Largeur d'assise: 53 cm
- Hauteur des accoudoirs: 67 cm
- Charge dynamique sécuritaire: 135 kg

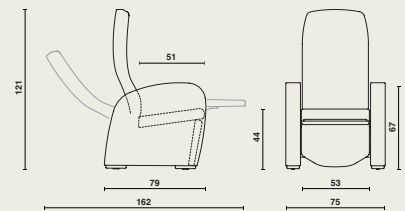

Matériel utilisé et finition

- **Bois:** hêtre massif, plaque multiplex, OSB, MDF.
- **Métal:** revêtement époxy (noir).
- **Mousse ignifugée.**
- **Tissu d'ameublement:** selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Coussin d'assise avec une couche supérieure en mousse viscoélastique de 40 mm et housse bi-élastique (également possible sur le repose-jambes).
- Réducteur anatomique.
- Appui-tête latéral.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Douille (pour porte-sérum) Ø 19 mm.
- Roulettes jumelées, cachées de Ø 32 mm à l'avant, Ø 50 mm à l'arrière avec freinage au moyen d'une manette de frein.
- Batterie.
- Roues design Ø 100 mm avec frein.
- Roues design Ø 100 mm avec frein, dont 2 roues directionnelles.
- Repose-pieds (seulement avec roues Ø 100 mm).
- Poignée ergonomique en matière synthétique (seulement avec roues Ø 100 mm).
- Appui-tête/nuque réglable et amovible.
- Télécommande avec câble.
- Tête amovible.

