

Domus E-move Soft

15032 In aller Seelenruhe und Gemütlichkeit optimalen Sitzkomfort genießen: Das ist der Kerngedanke des Domus Ruhesessels. Das E-Move-Mechanismus ist mit einer elektrisch verstellbaren Bein- und Rückenstütze ausgestattet, die sich dank einer integrierten Bedienung in der Armlehne einfach steuern lässt.

Gestell

- Die abgerundeten Seitenteile sind aus 2 OSB-Platten (Dicke: 30 mm) hergestellt und mittels ein Stahlkonstruktion stark mit einander verbunden.
- Die Seitenteile sind komplett mit feuerhemmendem Schaum und doppelter Steppnaht gepolstert.
- Komfortable breite Armlehnen von ± 10 cm.
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- Keine sichtbare Befestigungspunkte.
- Beine aus massiven Buchenholz, mit Gleitern aus Kunststoff ausgestattet.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Der abgerundete Sitz vorn behindert den Blutkreislauf nicht.
- Komfortable Sitzhöhe (44 cm)
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.

Rückenlehne und Beinstütze

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 3 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Beinstütze: Schichtholz, Dicke 10 mm und mit feuerhemmendem Schaum gepolstert.

E-move Mechanismus

- Zwei Antriebsselemente kippen die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine 'Zero Gravity' Position (*).
- Die Rückenlehne und Beinstütze können auch individuell verstellt werden.
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 99° (Sitzposition) und 135° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 22 Grad, wenn der Relaxmechanismus aktiviert wird.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.
- Der Domus E-move lässt sich mittels einer integrierten Bedienung auf der Außenseite der Armlehne einfach betätigen. Eine Handbedienung mit Kabel ist auch erhältlich (option).

Farben

Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.


(*) 'Zero Gravity' Position: Diese Sitz-/Liegeposition ist auf Daten der NASA gegründet. In dieser neutralen Körperposition befinden alle Muskelkräfte sich in einem biomedizinischen Gleichgewicht. ("From outer space to you", Omni, March 1994.)



Maße

15032 | Domus e-move Soft:

- 76 x 79 x H 122 cm
- Sitzhöhe: 44 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Höhe der Armlehnen: 67 cm
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

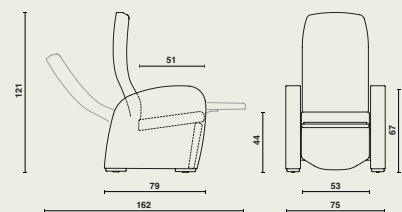

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv), Schichtholz, MDF-Platte, OSB-Platte.
- Metall: epoxybeschichtet (schwarz).
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen und Zubehör

- Sitzpolster mit einer Oberschicht aus 40 mm viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Anatomisches Reduktionskissen.
- Ohrenbacken.
- Fixationsbügel.
- (Hülse für) Infusionsständer Ø 19 mm
- Versteckte Doppelaufrollen vorn Ø 32 mm, hinten Ø 50 mm mit Bremse.
- Batterie.
- Laufrollen Ø 100 mm mit Bremse.
- Laufrollen Ø 100 mm mit Bremse und 2 Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze aus Kunststoff (mit Laufrollen Ø 100 mm)
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne (mit Laufrollen Ø 100 mm).
- Abnehmbare und abstellbare Nackenkissen.
- Handbedienung mit Kabel.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.

