

Lago Care Obesitas

20955 Bij het Lago Care Obesitas bed gaan veiligheid en comfort hand in hand. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een efficiënte zorg.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 16^\circ$.
- Verborgen wielen $\varnothing 50$ mm met kunststof afdekkappen, 2 aan 2 geremd.
- Designpedaal voor activering van het remmechanisme.
- De motorvrije onderwagen verhoogt de toegankelijkheid en het reinigingsgemak.
- Tilliftoegankelijk.
- Bed is verplaatsbaar zonder bariatrische patiënt in iedere positie behalve in de veiligheidspositie (uitgezonderd bed met wielen $\geq \varnothing 100$ mm).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) volkern ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° (indien uitgerust met een snelverstelling).
- Kniesteen elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm (niet mogelijk bij Pollux onrusthekkens).
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie.
- De handbediening is voorzien van een vergrendelmogelijkheid via toetsencombinatie.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)
- Neo (*) / Lusso (*)

Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 / 104,5 / 114,5 / 124,5 cm, lengte: 208 cm
- Hoogte-variatie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm (28 cm - 83 cm bij wielen $\varnothing 150$ mm).
- Vrije ruimte onderwagen: 137 mm (bij ligvlakhoogte van 42 cm)
- Veilig gewicht: 350 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 / 90 / 100 / 110 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar).

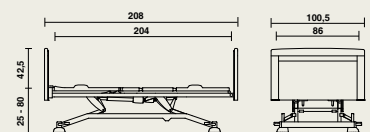

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, fineer), gemelamineerde spaanplaat.
- Schuim: CMHR- schuim (brandvertragend).
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 blank alu.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.
Voor **kleuren**: zie ons uitgebreid gamma.

Opties

- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Stootwielen (niet mogelijk op Midea)
- Muurafstandhouder.
- Verlichte handschakelaar.
- Handschakelaar met selectieve blokkering (incl. Trendelenburg).
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth (indien vierdelig ligvlak).
- Leeslamp.
- Batterij.
- Centraal geremde wielen $\varnothing 100$ mm / $\varnothing 125$ mm / $\varnothing 150$ mm met rembeugel.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- Zuurstoffleshouder ($\varnothing 147$ mm, H 222 mm)

(*) Optie

