

Olympia Care

08888 Het Olympia verpleegbed: beproefd, duurzaam en veilig. Met de Olympia care laat de woonruimte zich heel persoonlijk vormen, dankzij de verschillende bedpanelen, de ruime kleurkeuze en de mogelijkheid tot verborgen wielen.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Trendelenburg (*) en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 17^\circ$.
- Hoogwaardige Levina designwielen $\varnothing 125$ mm, wiel per wiel geremd.
- Hoogwaardige Integral S designwielen $\varnothing 125$ of 150 mm, centraal geremd (*).
- Designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme (*).
- Centraal geremde verborgen wielen $\varnothing 50$ mm mogelijk met kunststof afdekkappen (*).
- De motorvrije onderwagen verhoogt de toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° . (indien uitgerust met een snelverstelling)
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriem.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm (niet mogelijk bij Pollux onrusthekkens).
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar of een *mini-verpleegbox* (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en bediening onderbedlicht (*).
- Een *mini-verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- Een vergrendeldoos (*) blokkeert alle elektrische functies van de handschakelaar d.m.v. 1 draaiknop.
- De handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
 - Hoogte-variatie ligvlak:
 - $\pm 35,5^*$ cm - $\pm 78,5$ cm (bij wielen $\varnothing 125$ mm)
 - $\pm 34,5^*$ cm - $\pm 77,5$ cm (bij verborgen wielen)
 - Vrije ruimte onderwagen:
 - L: 170 mm, R: 135 mm (bij wielen $\varnothing 125$ mm)
 - L: 160 mm, R: 125 mm (bij verborgen wielen)
 - Veilig gewicht: 250 kg
 - Gewicht (zonder opties): 125 kg
 - Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
 - Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte i.f.v. onrusthekkens
- (*) bij Trendelenburg + 2,5 cm

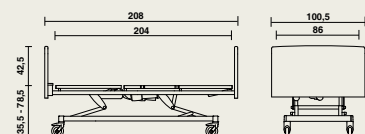

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: beuk (massief, fineer), spaanplaat (gemelamineerd).
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu.
- Zelfsmerende kunststof scharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialen fiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4-delig stalen ligvlak.
- Ligvlak met uitneembare volkernplaten.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Puro, Felina of Valentino.
- Stootwielen en/of muurafstandhouder.
- Onrusthekkens.
- Vergrendeldoos (ACL) of mini-verpleegbox (ACC).
- Handschakelaar met selectieve blokkering (incl. Trend).
- Verlichte handschakelaar en/of nachtlucht onder bed.
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth (indien vierdelig ligvlak).
- Houten ombouw aan onderwagen en/of ligkader.
- Accessoirehaakjes.
- Batterij.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- Dekenrek.
- Zuurstoffleshouder ($\varnothing 147$ mm, H 222 mm)

(*) Optie



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.